



Moduł eWyniki

Instrukcja użytkownika

Spis treści

Rozdział 1	Rozpoczęcie pracy z modułem	2
Rozdział 2	Konfiguracja Modułu eWyniki	4
2.1	OID świadczeniodawcy	4
2.2	Dodanie instytucji zewnętrznej	5
2.2.1	Konfiguracja wymiany danych	6
2.2.2	Przekodowanie słownika badań	8
2.3	Dodanie badania do słownika	10
2.3.1	Dodanie badania pakietowego	13
2.4	Dodatkowa konfiguracja modułu	14
Rozdział 3	Dodanie zlecenia w Gabinetce	15
3.1	Zlecenie cykliczne	19
Rozdział 4	Punkt pobrań w mMedica	21
4.1	Pobranie materiału	21
4.2	Ręczne dodanie zlecenia	24
4.3	Anulowanie wybranego badania	26
4.4	Rozbicie zlecenia	26
4.5	Zmiana laboratorium docelowego	28
Rozdział 5	Przegląd zleceń	29
5.1	Skierowanie zlecenia do pobrania	30
5.2	Anulowanie zlecenia	31
Rozdział 6	Ewidencja zleconych badań w mMedica	32
Rozdział 7	Obsługa dokumentów anulujących wyniki badań	34
Rozdział 8	Rozliczenie badań prywatnych w Module Komercyjnym	36

Wstęp

Moduły eWyniki Lab oraz eWyniki Diag umożliwiają automatyczną wymianę danych z laboratorium i pracownią diagnostyczną. Moduły zawierają punkt pobrań, umożliwiają przesyłanie zleceń bezpośrednio z mMedica do laboratorium, automatyczny odbiór wyników i dołączenie ich do dokumentacji medycznej.

Moduł eWyniki jest dodatkowym modułem dostępnym w wariacie mMedica Std oraz Std+. Moduł eWyniki Lab zapewnia integrację z jednym laboratorium, natomiast eWyniki Lab+ umożliwia integrację z nieograniczoną liczbą laboratoriów. Z kolei moduł eWyniki Diag służy do integracji z jedną pracownią diagnostyczną, podczas gdy eWyniki Diag+ pozwala na integrację z nieograniczoną liczbą pracowni diagnostycznych.

Dla zapewnienia poprawnej wymiany danych, oprogramowanie pracujące w laboratorium lub pracowni diagnostycznej musi wykorzystywać protokoły oraz formaty wymiany danych opisane w dokumencie [„Opis modelu integracji”](#).

Dla poprawnego działania eksportu zleceń i importu wyników w systemie Windows 8 oraz 8.1, program mMedica należy uruchamiać jako administrator.

Ilustracje i „zrzuty” ekranowe zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter instruktażowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu ekranów. Rzeczywisty wygląd ekranów zależy od posiadanej wersji aplikacji, aktywnych modułów dodatkowych oraz numeru wydania. Większość zrzutów ekranowych zamieszczonych w niniejszej instrukcji została wykonana przy pomocy wersji Standard+ z aktywnymi wszystkimi modułami dodatkowymi.

Rozdział

1

Rozpoczęcie pracy z modułem


Aby rozpocząć pracę z modułem eWyniki należy:

- dokonać zakupu modułu na stronie Centrum Zarządzania Licencjami
- pobrać nowy klucz licencyjny i wczytać go do programu mMedica w [Zarządzanie > Operacje techniczne > Aktywacja systemu mMedica](#)
- włączyć moduł eWyniki Laboratorium lub eWyniki Diagnostyka w [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [System > Moduły dodatkowe](#), dostępne jako parametr dla stacji roboczej

Uwaga! Moduł eWyniki wymaga zamówienia licencji na liczbę stanowisk równą liczbie stacji, z których wykonywane będzie zlecenie badań (wystawianie skierowań w Gabinetce) oraz obsługa punktu pobrań.

Szczegółowa instrukcja włączenia modułu:

1. Przejść do: [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [System > Moduły dodatkowe](#).
2. Wybrać ikonę **Stacja**, znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu.
3. Na liście modułów dodatkowych zaznaczyć moduł **eWyniki Laboratorium** lub **Diagnostyka** zgodnie z zakupioną licencją.
4. Zapisać zmiany przyciskiem **Zatwierdź**.
5. Zaakceptować komunikat o konieczności restartu aplikacji i ponownie zalogować się do programu.

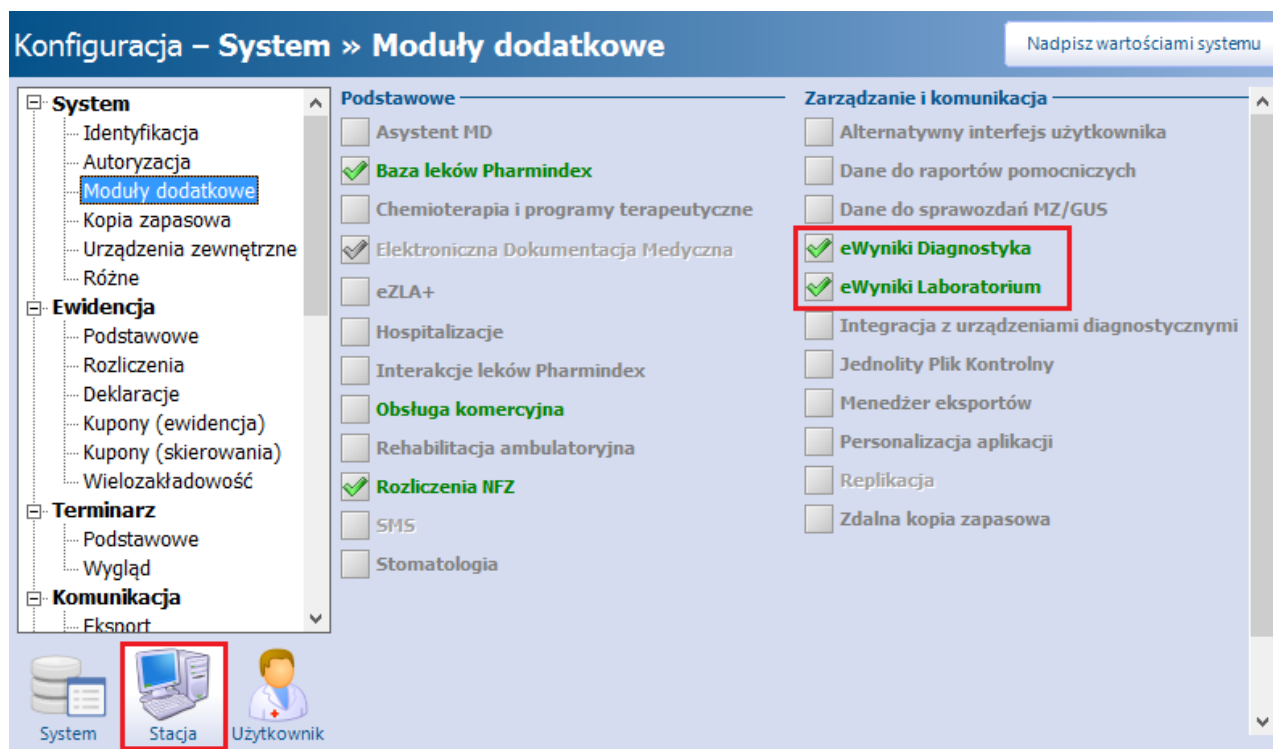

Po poprawnym uruchomieniu modułu, można rozpocząć z nim pracę. Obsługa Modułu eWyniki jest dostępna

z poziomu okna startowego programu mMedica.



Konfiguracja Modułu eWyniki


Podczas pierwszego uruchomienia Modułu eWyniki należy skonfigurować parametry integracji, niezbędne do obsługi prostego zlecenia.

2.1 OID świadczeniodawcy

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [Moduły dodatkowe](#) > [eWyniki](#)

Konfigurację modułu należy rozpocząć od wprowadzenia identyfikatora OID placówki. Jego zadaniem jest identyfikacja świadczeniodawcy w ramach systemu odpowiedzialnego za udostępnianie wyników badań. Jeśli kod OID nie był wcześniej nadany, należy ustalić go wraz z instytucją, z którą nastąpi integracja.

W celu uzupełnienia kodu należy przejść do powyższej ścieżki i w polu "Identyfikator placówki" ręcznie wprowadzić otrzymany kod, następnie zatwierdzić zmiany.

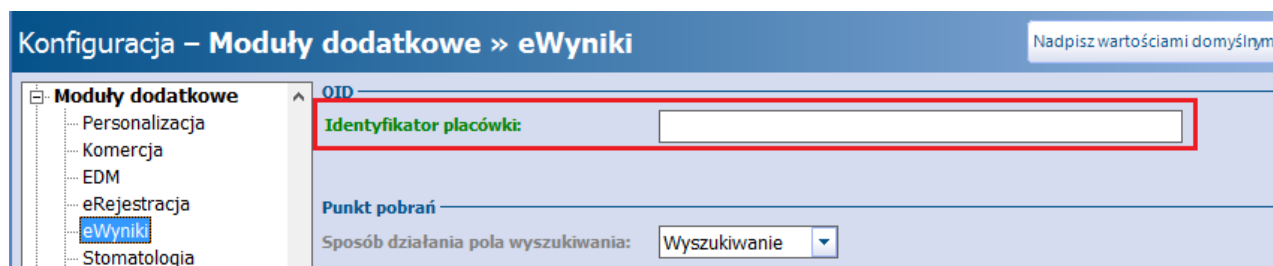

Uwaga! We wcześniejszych wersjach aplikacji identyfikator OID placówki wprowadzany był w ścieżce: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [System](#) > [Identyfikacja](#) w polu "Identyfikator (OID) w systemie HL7". W wersji 5.14.3 dokonano przeniesienia identyfikatora do pozycji [Moduły dodatkowe](#) > [eWyniki](#) w [Konfiguratorze](#). Jeśli użytkownik posiadał uzupełniony identyfikator placówki, został on automatycznie przeniesiony do nowej lokalizacji.

Dotychczas wykorzystywane pole "Identyfikator (OID) w systemie HL7" zostało przeznaczone do obsługi e-usług w ramach P1 (eRecepta, eSkierowanie).

2.2 Dodanie instytucji zewnętrznej

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Rejestr instytucji](#)

Kolejnym etapem konfiguracji jest utworzenie instytucji, do której będą wysyłane zlecenia. W tym celu należy przejść do okna *Rejestru instytucji* według powyższej ścieżki i po wybraniu przycisku **Nowy** uzupełnić nazwę instytucji oraz jej podstawowe dane.

The screenshot shows the 'Rejestr instytucji' interface. On the left, there is a search panel with fields for 'Kod świadczeniodawcy', 'Nazwa', 'Miejscowość', and 'REGON'. The main area contains a table with the following columns: 'Kod świadc.', 'Nazwa', 'REGON', 'Ulica', and 'Miejscowość'. Below the table, the 'Nowa instytucja' form is displayed with the following fields: 'Kod świadczeniodawcy', 'Nazwa' (containing 'Laboratorium testowe'), 'REGON', 'NIP', 'Nazwa banku', and 'Nr konta'. The 'Nazwa' field is highlighted with a red box. The form has tabs for '1. Dane podstawowe', '2. Dane adresowe', '3. Dane dodatkowe', '4. Rodzaje', and '5. Wymiana danych'.

Następnie na zakładce **4. Rodzaje** wskazać rodzaj instytucji odpowiedni dla dodawanego podmiotu, poprzez zaznaczenie pola "Laboratorium" lub "Pracownia diagnostyczna". Ponadto można określić czy instytucja ma być domyślną w danym rodzaju, poprzez zaznaczenie pola "Czy domyślny". Jego zaznaczenie spowoduje automatyczne podpowiadanie wprowadzanej instytucji na [skierowaniu](#) wystawianym w Gabinetce.

The screenshot shows the '4. Rodzaje' (Types) tab in the 'Nowa instytucja' form. It displays a table with the following columns: 'Nazwa' and 'Czy domyślny'. The table contains the following rows:

Nazwa	Czy domyślny
<input type="checkbox"/> Inne	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Instytucja sanitarna	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Laboratorium	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ministerstwo	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Podmiot leczniczy	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Pracownia diagnostyczna	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Praktyka zawodowa	<input type="checkbox"/>

2.2.1 Konfiguracja wymiany danych

W celu określenia parametrów wymiany danych z instytucją należy przejść do zakładki 5. *Wymiana danych*. W polu "Rodzaj" (1) z listy rozwijanej wybrać odpowiedni rodzaj przekodowania, używanego podczas generacji zlecenia. Do wyboru są dwie wartości:

- a) Laboratorium
- b) Diagnostyka

Następnie poprzez wybór przycisku  w polu "Przekodowanie" (2) wybrać przekodowanie z dostępnego [słownika](#).

Ostatnim najważniejszym etapem jest określenie sposobu komunikacji z dostawcą w sekcji *Komunikacja*, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji i uzupełnienie wymaganych danych:

- **Folder współdzielony** - jeśli wymiana danych odbywa się poprzez folder współdzielony, w polu "Ścieżka dostępu" należy wpisać ścieżkę dostępu do folderu. Dostęp do folderu powinni mieć wszyscy użytkownicy, którzy będą zlecać badania oraz odbierać wyniki.
- **WebService** - jeśli wymiana danych odbywa się za pomocą usługi Webservice, należy ręcznie wpisać jej parametry dostarczone przez administratora systemu zewnętrznego. Wpisuje się je w polach: Adres serwera, Użytkownik, Hasło. W polu "Timeout" istnieje możliwość określenia wartości Timeout. W przypadku braku jej określenia w tym miejscu przy komunikacji z laboratorium/pracownią diagnostyczną zostanie uwzględniona wartość Timeout dla usług sieciowych ze ścieżki: [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator > Komunikacja > Inne](#).

W przypadku, gdy dostawca nadaje własny kod klienta oraz dostawcy, należy je uzupełnić w polach: "Kod klienta" i "Kod dostawcy".

Parametr **PIK HL7CDA** określa, czy skierowania elektroniczne na badania laboratoryjne i diagnostyczne, tworzone w ramach modułu eWyniki, mają być weryfikowane pod kątem zgodności ze specyfikacją Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA. W przypadku włączenia parametru, wymagane będzie przypisanie procedury ICD-9 do każdego zlecanego badania. W związku z tym, przed włączeniem parametru zaleca się zweryfikowanie, czy wszystkie badania znajdujące się w [słowniku badań](#) laboratoryjnych/diagnostycznych posiadają przypisaną procedurę ICD-9. W innym wypadku system uniemożliwi dodanie badania do słownika, wystawienie skierowania czy wysłanie zlecenia z poziomu Punktu pobrań.

Uwaga! Włączenie powyższego parametru skutkuje wymogiem zastosowania przez użytkownika podpisu elektronicznego przy autoryzacji wizyty, na której zostało wystawione zlecenie do zintegrowanego laboratorium/pracowni diagnostycznej. W przypadku skierowania na badania laboratoryjne przekazanego do [Punktu pobrań](#) (lub w nim wystawionego) żądanie podpisu elektronicznego pojawi się w momencie autoryzacji danych po przypisaniu numerów próbek.

Parametr **Indeksuj dokumenty** jest aktywny do edycji tylko w przypadku włączonego parametru **PIK HL7CDA**. Jeżeli świadczeniodawca korzysta z modułu eArchiwum lub Modułu Integracji eRepozytorium w Chmurze, jego zaznaczenie spowoduje, że wyniki badań zwracane przez zintegrowane laboratorium/pracownię diagnostyczną, których dotyczy konfiguracja, będą uwzględniane w zadaniu automatycznego indeksowania, opisanego szczegółowo w [instrukcji obsługi](#) wspomnianych wcześniej modułów, w rozdziale "Indeksowanie dokumentów i wymiana EDM".

W wersji 8.3.0 aplikacji mMedica został dodany parametr **Przekaż z gabinetu**. Należy go zaznaczyć, jeżeli przy wystawianiu skierowań na badania laboratoryjne generowane zlecenia mają być przesyłane do laboratorium bezpośrednio z Gabinetu, po skorzystaniu z przycisku **Wyślij do laboratorium**. Dokładne informacje na temat tej funkcjonalności zawiera rozdział [Dodanie zlecenia w Gabinetcie](#).

Nowa instytucja

1. Dane podstawowe 2. Dane adresowe 3. Dane dodatkowe 4. Rodzaje 5. Wymiana danych

Dane podstawowe

Rodzaj: 1 * Laboratorium

Przekodowanie: 2 * ...

Kod klienta: Kod dostawcy:

PIK HL7CDA Indeksuj dokumenty Przełącz z gabinetu

Słownik badań

Wyświetlaj tylko przekodowane badania

Punkt pobrań

Jeden identyfikator pobrania dla wszystkich materiałów

Wymagaj pobrania materiału

Komunikacja

Typ: Folder współdzielony Webservice

Adres serwera: * Timeout: (ms)

Użytkownik: * Hasło: *

Za pomocą parametrów dostępnych w poszczególnych sekcjach zakładki **5.Wymiana danych** można dokonać dodatkowej konfiguracji modułu. Zaznaczenie poniższych opcji powoduje:

- **Wyświetlaj tylko przekodowanie badania** - zawężenie zawartości słowników badań laboratoryjnych i diagnostycznych do pozycji występujących w przekodowaniu dla wybranej instytucji. Oznacza to, że jeżeli użytkownik dokonał integracji z kilkoma instytucjami, to podczas wystawiania skierowania, w słowniku badań będą wyświetlane tylko te badania, które znajdują się w [przekodowaniu słownika](#) danej instytucji.
- **Jeden identyfikator pobrania dla wszystkich materiałów** - oznaczenie jednym zbiorczym kodem wszystkich materiałów w ramach zlecenia. Informację o sposobie identyfikacji materiału należy uzyskać od instytucji, z jaką nastąpi integracja. Szczegółowy opis w: [Pobranie materiału](#).
- **Wymagaj pobrania materiału** - domyślne zaznaczenie pola "Wymaga pobrania materiału" na skierowaniu na badania laboratoryjne wystawianym w Gabinetce. Pole będzie zaznaczać się automatycznie na podstawie wybranego laboratorium (zdj. poniżej).

Badania lab. Badania diag. Do specjalisty Do szpitala Do szpitala psych. Zabiegi rehab. Transport Transport > 120km Opiek dłuqoterm

1 (nowe)

Wizyta Dane med.

Nr umowy: Bez refundacji NFZ


Do laboratorium: 1667410 Laboratorium testowe Cito Wymaga pobrania materiału

Liczba wykonań: Do dnia: Interwał: Częstość:

W aplikacji mMedica istnieje funkcjonalność zdefiniowania parametru dotyczącego wymagania pobrania materiału w ramach zakładu leczniczego. Jeśli w systemie uruchomiono obsługę wielozakładowości, po zaznaczeniu parametru "Wymagaj pobrania materiału" zostanie wyświetlona tabelka, w której definiuje się zakłady lecznicze, w obrębie których będzie funkcjonował parametr.

Na podstawie tej konfiguracji, parametr określający, czy zlecenie ma zostać bezpośrednio przekazane do


Punktu pobrań, będzie domyślnie zaznaczany w tych komórkach organizacyjnych, które wchodzą w skład wskazanego zakładu leczniczego.

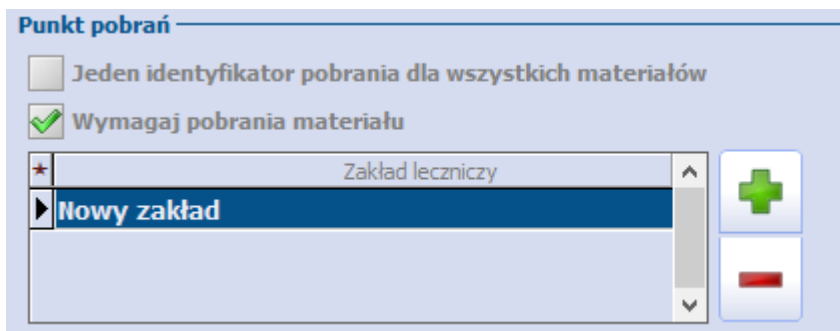


2.2.2 Przekodowanie słownika badań

Nazwy i kody badań zastosowane w programie mMedica mogą różnić się od nazw i kodów funkcjonujących w systemie zewnętrznym laboratorium lub pracowni diagnostycznej. W związku z tym konieczne jest uzupełnienie przekodowania dla każdego systemu zewnętrznego, zgodnie z przekazanymi przez nich danymi. Przekodowanie badań następuje dopiero w momencie wysyłki zlecenia, dzięki temu kody w ramach systemu mMedica pozostają cały czas takie same.

W celu dodania przekodowania należy wybrać przycisk  (2) w polu "Przekodowanie".

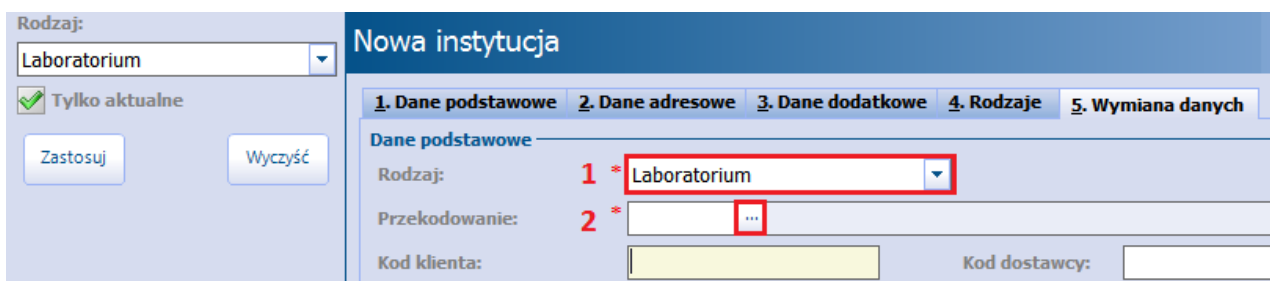

W otwartym oknie należy wybrać przycisk  **Dodaj pozycję do słownika**. W oknie *Przekodowanie słowników* (zdj. poniżej) określa się parametry przekodowania (integracji) takie jak nazwa oraz szereg identyfikatorów OID, które powinny zostać dostarczone przez instytucję, z którą następuje integracja.

Aby ręcznie dodać przekodowanie słownika należy:

1. W polu "OID rejestru badań" wprowadzić unikalny identyfikator rejestru (słownika) badań obsługiwanego w ramach systemu laboratoryjnego/diagnostycznego.
2. W polu "OID rejestru pobrań" wprowadzić unikalny identyfikator rejestru pobrań (zakresu liczb), w ramach którego numerowane są pobrania materiałów, obsługiwane w ramach systemu laboratoryjnego/diagnostycznego.
3. Dla badania istniejącego w słowniku badań wykorzystywanym w programie mMedica wprowadzić okodowanie funkcjonujące w systemie zewnętrznym:
 - a) Podświetlić na liście badań odpowiednie badanie.
 - b) W kolumnie "Kod zewnętrzny" wpisać kod otrzymany od instytucji.
 - c) W kolumnie "Nazwa zewnętrzna" wpisać nazwę otrzymaną od instytucji.

Jeśli w trakcie pracy pojawi się konieczność dodania pojedynczego badania do słownika przekodowań, należy je dodać za pomocą przycisku **Dodaj**, znajdującego się w dolnej części okna *Przekodowanie słowników*, a następnie uzupełnić jego dane zewnętrzne. Badanie dodane z tego poziomu będzie widoczne np. w słowniku badań laboratoryjnych w pozostałych miejscach aplikacji.

Podanie OID rejestru klientów i dostawców nie jest wymagane - w takim przypadku zarówno świadczeniodawca jak i dostawca (laboratorium lub pracownia diagnostyczna) będą identyfikowani kodem REGON.

Przekodowanie słowników

Dane podstawowe

Rodzaj: * Laboratorium Aktualne

Nazwa: * Laboratorium testowe

OID rejestru badań: * OID rejestru pobrań: *

OID rejestru klientów: OID rejestru dostawców:

Pozycje

*	Kod badania	Nazwa badania	Materiał	ICD9	Kod zewnętrzny	Nazwa zewnętrzna
▶	91.83G	Grzyby - posiew	Wymaz	91.831	1:GP;1	Grzyby p1
	A01-U	Ogólne badanie moczu (Urilux)	Mocz	A01	2:MU;1	Mocz u1
	BIS001	Albumina	Surowica	I09	3:AL;1	Albumina1
	BIS002	Aminotransferaza alaninowa (ALT)	Surowica	I17	3:ALT;2	Alt2
	BIS003	Aminotransferaza asparaginianowa (AST)	Surowica	I19		
	BIS004	Amylaza	Surowica	I25		
	BIS005	Antygen HBs-AgHBs	Surowica	V39		
	BIS006	Białko C-reaktywne (CRP)	Surowica	I81		
	BIS007	Białko całkowite	Surowica	I77		
	BIS008	Bilirubina bezpośrednia	Surowica	I87		
	BIS009	Bilirubina całkowita	Surowica	I89		

Eksportuj
Importuj
Dodaj
Zatwierdź
Wyjście

Przekodowanie przekazane przez instytucję zewnętrzną można dodać jednorazowo, korzystając z funkcji importu danych. W celu zaczytania definicji przekodowania należy wybrać przycisk Importuj, znajdujący się w dolnej części okna *Przekodowanie słowników*, następnie wskazać z dysku komputera plik z rozszerzeniem *.RCD. Potwierdzeniem poprawnego zaczytania przekodowania będzie pojawienie się aktywnego przycisku **Zakończ** w oknie *Import przekodowania*. Szczegółowe informacje dotyczące struktury pliku importu znajdują się pod adresem: mmedica-download.asseco.pl/inst/eWyniki/mMedica_RCD_1_0.xlsx

Import przekodowania

Zaktualizowano badanie: MOC001- Ilościowe oznaczanie amylazy

Zaktualizowano badanie: MOC002- Ilościowe oznaczanie białka

Zaktualizowano badanie: MOC003- Ilościowe oznaczanie glukozy

Zaktualizowano badanie: MOC004- Ilościowe oznaczanie wapnia

Zaktualizowano badanie: MOC005- Ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu

Zaktualizowano badanie: UKK001- Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)


Zaktualizowano badanie: UKK002- Fibrynogen

Zaktualizowano badanie: UKK003- Wskaźnik protrombinowy (INR)

Zakończ


Uwaga! W przypadku gdy integracja odbywa się poprzez usługi WebServices, istnieje możliwość wyboru kodu badania bezpośrednio ze słownika dostarczanego przez system zewnętrzną. W tym celu należy wybrać

Konfiguracja Modułu eWyniki

przycisk  znajdujący się obok kodu badania.

Nazwa badania	Materiał	ICD9	Kod zewnętrzny	Nazwa zewnętrzna
Grzyby - posiew	Wymaz	91.831	1:GP;1	
Ogólne badanie moczu (Urilux)	Mocz	A01		

Po uzupełnieniu wszystkich danych przekodowania należy zapisać zmiany i w oknie wyboru przekodowania wybrać nowo dodaną pozycję:

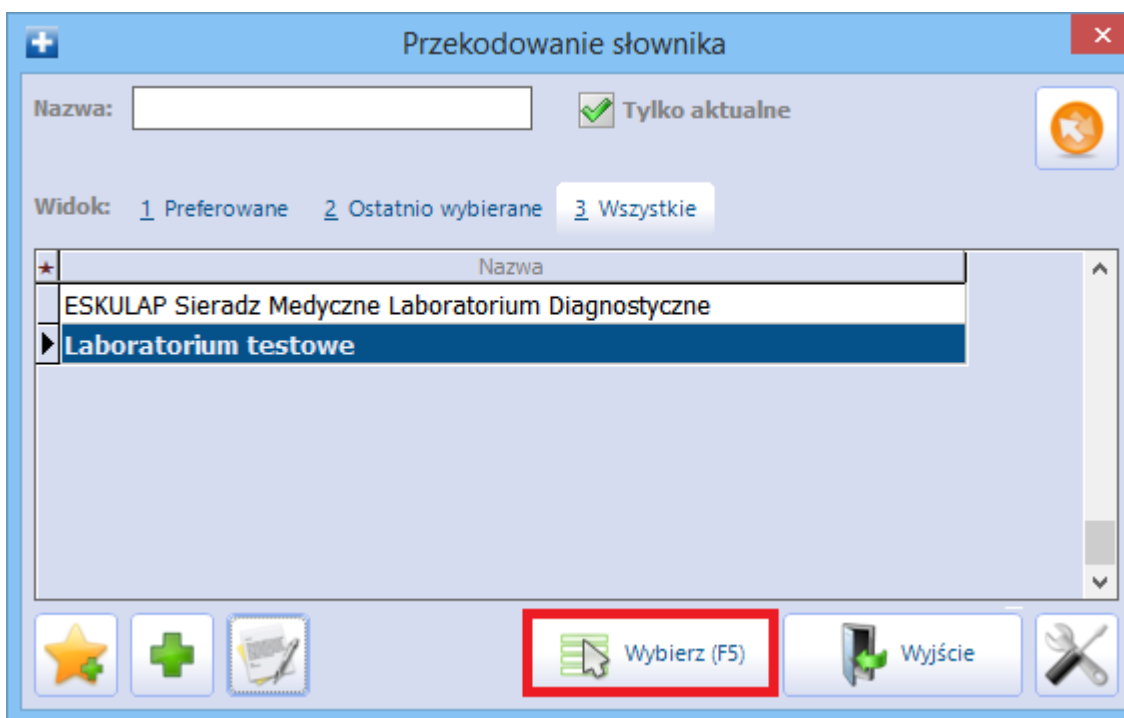

2.3 Dodanie badania do słownika

Ścieżka: [Gabinet](#) > menu: [Funkcje dodatkowe](#) > [Słownik badań laboratoryjnych/diagnostycznych](#)

W aplikacji mMedica zostały przygotowane dwa słowniki, wykorzystywane do wystawiania zleceń w Gabinetecie: słownik badań laboratoryjnych oraz słownik badań diagnostycznych. W słownikach tych zostały zawarte badania refundowane, zgodne ze słownikiem badań publikowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dodatkowo dokonano uzupełnienia słownika badań laboratoryjnych o pozycje ze słownika ICD-9 z folderu "Badania laboratoryjne i inne", w związku z czym ilość badań znajdujących się w słowniku może wzrosnąć do ponad 900 sztuk. Wszystkie zaimportowane badania laboratoryjne zostały przypisane do odpowiedniej grupy (np. badanie 'Ciała ketonowe w moczu' należy do grupy 'Analityka') i do właściwej procedury ICD-9.

Słowniki pozostawiają możliwość konfiguracji i dostosowania do potrzeb użytkownika, poprzez dodanie nowych pozycji lub edycję już istniejących (tutaj uwaga - pozycje systemowe są nieedytowalne). W tym celu należy przejść do Gabinetu, wybrać menu "Funkcje dodatkowe" dostępne w lewym górnym rogu formatki, a następnie jedną z pozycji:


Funkcje dodatkowe

- Historia wizyt
- Słownik leków
- Słownik rozpoznań
- Słownik procedur
- Słownik grup dyspanseryjnych
- Słownik badań laboratoryjnych**
- Słownik badań diagnostycznych

Nowa wizyta NFZ Nowa wizyta receptowa Nowa wizyta komercyjna

Lista pacjentów do Gabinetu

Nazwisko i imię	Wiek	Umówiony na
Kowalski Jan	48	2016-09-22 10:48

W oknie słownika *Badania laboratoryjne* (przykład) wyświetlane są aktualne, refundowane badania laboratoryjne. Aby dodać nowe badanie należy wybrać przycisk  **Dodaj pozycję do słownika.**

Badania laboratoryjne

Kod lub nazwa: Grupa:

Tylko aktualne Tylko refundowane Tylko powiązane z procedurą

Widok: 1 Preferowane 2 Ostatnio wybierane 3 Wszystkie

Kod	Nazwa	Materiał	Grupa	Procedura
BIS001	Albumina	Surowica	Badania biochemi...	I09
BIS002	Aminotransferaza alaninowa (ALT)	Surowica	Badania biochemi...	I17
BIS003	Aminotransferaza asparaginianowa (AST)	Surowica	Badania biochemi...	I19
BIS004	Amylaza	Surowica	Badania biochemi...	I25
BIS005	Antygen HBs-AgHBs	Surowica	Badania biochemi...	V39
KAL003	Badanie ogólne	Kał	Badanie kału	A23
BIS006	Białko C-reaktywne (CRP)	Surowica	Badania biochemi...	I81
BIS007	Białko całkowite	Surowica	Badania bioche...	I77
BIS008	Bilirubina bezpośrednia	Surowica	Badania biochemi...	I87
BIS009	Bilirubina całkowita	Surowica	Badania biochemi...	I89
BIS010	Cholesterol-HDL	Surowica	Badania biochemi...	K01
BIS011	Cholesterol-LDL	Surowica	Badania biochemi...	K03
BIS012	Cholesterol całkowity	Surowica	Badania biochemi...	I99
BIS015	Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)	Surowica	Badania biochemi...	L15

Wybierz (F5) Wyjście

W nowo otwartym oknie *Badanie laboratoryjne* wprowadzić podstawowe dane badania, jak np. "Kod", "Nazwa", "Materiał". Pola, których uzupełnienie jest wymagane oznaczono (*). Poniżej opisano znaczenie pól znajdujących się w oknie:

- **Kod** - unikalny kod badania identyfikujący go w bazie.
- **Nazwa** - nazwa badania wyświetlana w słownikach i innych miejscach programu.
- **Grupa** - przypisanie badania do konkretnej grupy umożliwi jego sprawne wyszukanie, dzięki opcji filtrowania danych. Badanie można przypisać do istniejącej grupy, wyświetlanej po rozwinięciu listy lub do nowej. Aby utworzyć nową grupę należy w omawianym polu wpisać ręcznie jej nazwę.
- **Materiał** - kody materiałów do badań laboratoryjnych np. wymaz, krew, surowica. Pole wymagane.
- **Procedura** - kod procedury ICD-9 wybieranej ze słownika.

Konfiguracja Modułu eWyniki

- **Badanie** - kod badania POZ wybierany ze słownika.

Badanie laboratoryjne

Kod: * TEST

Nazwa: * Test

Grupa: * BADHEM ... Badania hematologiczne

Materiał: B ... Krew

Procedura: C53 ... Morfologia krwi 8-parametrowa

Badanie POZ: 1001100006 ... Morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi

Czy refundowane Osobne zlecenie Czy pakietowe Profilaktyka 40+

Czy aktualne

Badania w pakiecie:

Kod	Nazwa

Zalecenia:

Zatwierdź Wyjście

Uwaga! Uzpełnienie pól "Procedura" i "Badanie" jest wymagane do prawidłowej sprawozdawczości. Dzięki temu powiązaniu wraz z importem wyników zostaną dodane odpowiednie kody badań POZ i procedur ICD-9 w: [Ewidencja](#) > [Deklaracje](#) > [Zestawienie wykonanych badań POZ](#). Z kolei na podstawie tych danych zliczane są wartości w Załączniku nr 3c do umowy POZ.


W wersji 9.0.0 aplikacji mMedica w oknie danych badania został udostępniony parametr "**Czy refundowane**". Umożliwia on oznaczenie badania jako refundowanego przez NFZ. Dla pozycji predefiniowanych, utworzonych w słowniku na podstawie listy badań refundowanych, opublikowanej przez NFZ, parametr ten jest włączony domyślnie, bez możliwości edycji. Natomiast w przypadku badania dodanego do słownika przez użytkownika programu zaznaczy się on automatycznie po wyborze badania refundowanego w polu "Badanie POZ".


Zaznaczenie pola "**Osobne zlecenie**" spowoduje, że w przypadku dodania badania na skierowanie, zostanie wygenerowane osobne zlecenie z unikalny numerem, zawierające wyłącznie to badanie.

2.3.1 Dodanie badania pakietowego

W programie mMedica istnieje możliwość tworzenia badań pakietowych, czyli pozycji składających się z kilku badań. Przykładem jest lipidogram składający się z nast. badań: cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG. Dzięki tej funkcji lekarz podczas wystawiania skierowania wybiera ze słownika tylko jedno badanie (np. lipidogram), natomiast w pliku wysyłanym do laboratorium przekazywane są wszystkie elementy składowe badania pakietowego (tj. HDL, LDL itd.).

Aby dodać badanie pakietowe należy:

1. Przejść do ścieżki: [Gabinet](#) > menu: [Funkcje dodatkowe](#) > [Słownik badań laboratoryjnych/diagnostycznych](#).
2. W oknie *Badania laboratoryjne* wybrać przycisk **Dodaj pozycję do słownika**.
3. W oknie *Badanie laboratoryjne* wykonać nast. czynności:
 - a) Uzupełnić pola "Kod", "Nazwa" itd. zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale: [Dodanie badania do słownika](#).
 - b) Zaznaczyć checkbox "Czy pakietowe".
 - c) W sekcji *Badania w pakiecie* wybrać przycisk  **Dodaj badanie** i z dostępnego słownika wybrać poszczególne badania, które wejdą w skład pakietu. Zapisać zmiany.

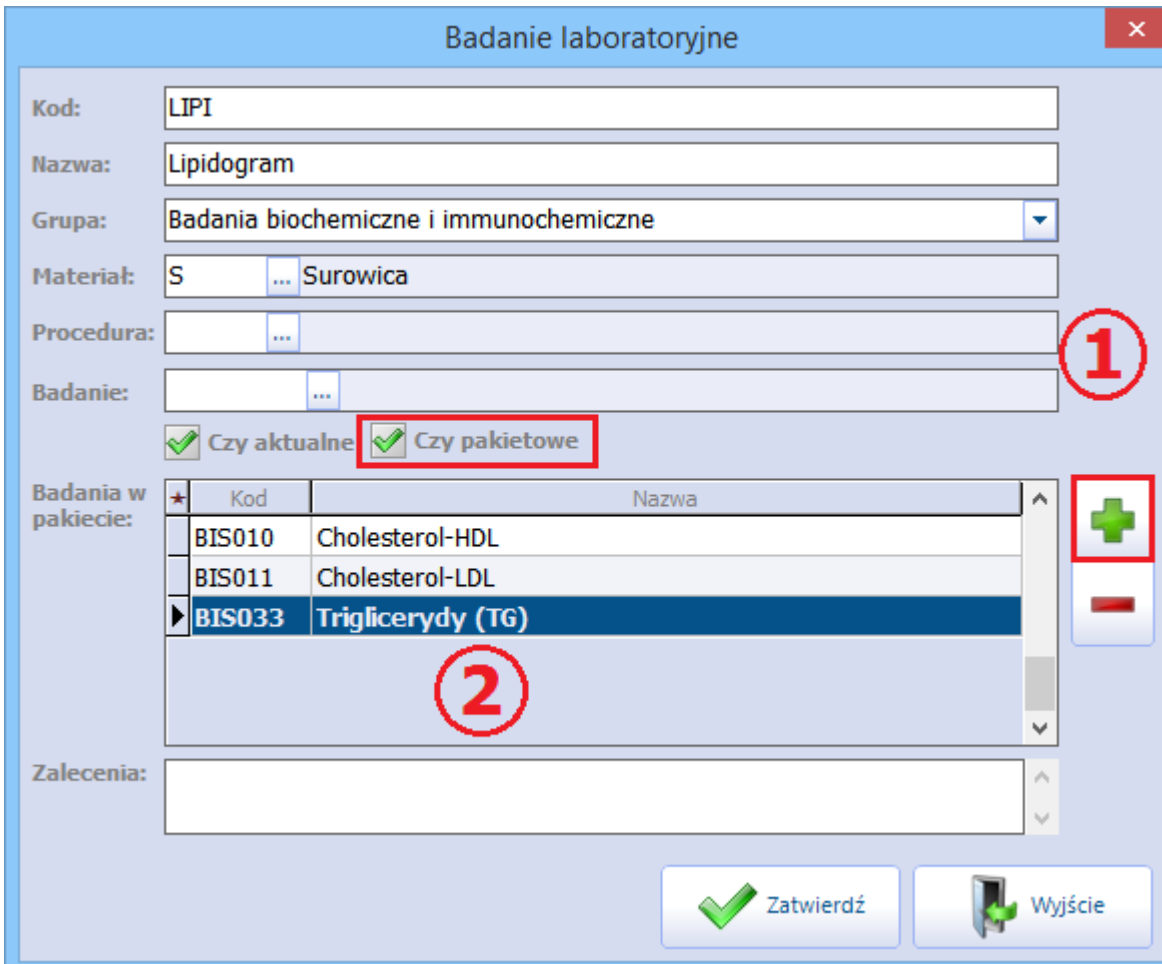

Badanie laboratoryjne

Kod: LIPI

Nazwa: Lipidogram

Grupa: Badania biochemiczne i immunochemiczne

Materiał: S ... Surowica

Procedura: ...

Badanie: ...

Czy aktualne Czy pakietowe

Badania w pakiecie:

Kod	Nazwa
BIS010	Cholesterol-HDL
BIS011	Cholesterol-LDL
BIS033	Triglicerydy (TG)

Zalecenia:

Zatwierdź Wyjście

Uzupełnianie pól "Procedura" i "Badanie" (1) nie jest wymagane - wtedy do sprawozdawczości zostaną wykorzystane kody ICD-9 i kody badań POZ powiązane z badaniami wybranymi w sekcji *Badania w pakiecie* (2). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy badanie pakietowe (np. lipidogram, zgodnie z przykładem) posiada swój kod np. w słowniku klasyfikacji procedur ICD-9. Wtedy zalecane jest dodatkowe uzupełnienie pola "Procedura" o te dane.

2.4 Dodatkowa konfiguracja modułu

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [Moduły dodatkowe](#) > [eWyniki](#)

W Konfiguratorze programu mMedica istnieje możliwość dodatkowej konfiguracji Modułu eWyniki.




Sekcja: [OID](#)

W sekcji podaje się [OID placówki](#), który odpowiada za identyfikację podmiotu z instytucją, z którą następuje integracja.

Sekcja: [Punkt pobrań](#)

W sekcji dokonuje się konfiguracji modułu dla formatki [Punkt pobrań](#). Użytkownik może określić sposób działania pola wyszukiwania, znajdującego się w prawym górnym rogu formatki:

- **Filtrowanie** - po wprowadzeniu warunku w filtrze np. numeru PESEL, lista zleceń zostanie zawężona do wyników spełniających wpisany warunek.
- **Wyszukiwanie** - po wprowadzeniu danych w filtrze na liście zleceń zostanie zaznaczona pozycja dla pierwszego znalezionej zlecenia, spełniającego wpisany warunek.

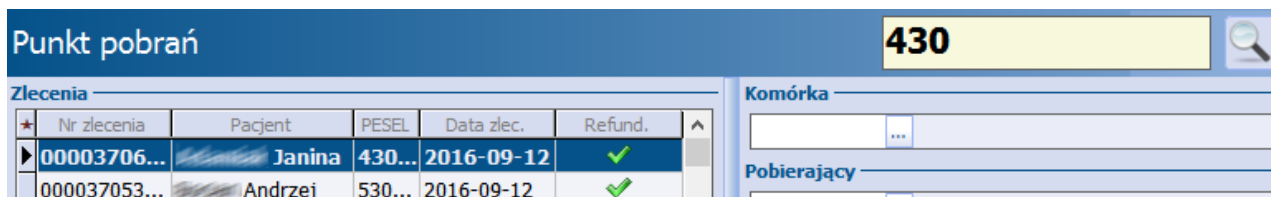

W polu "Komórka organizacyjna" wskazuje się domyślną komórkę, która będzie podpowiadana na formatce [Punkt pobrań](#). Jeśli dla komórki organizacyjnej zostanie utworzona księga zabiegów, to każdorazowe zatwierdzenie pobrania materiału w punkcie pobrań będzie dodawało wpis w księdze zabiegów.

Sekcja: [Import](#)

Zlecenie wykonania badań może zostać zrealizowane przez laboratorium częściowo. Parametr "**Generuj badania POZ na podstawie skierowania**" umożliwia określenie czy badania POZ mają być generowane na podstawie wystawionego skierowania, czy przesłanego wyniku:

- Zaznaczenie parametru - badania POZ zostaną uzupełnione na podstawie skierowania. Jeśli laboratorium wykona tylko część zleconych badań, [badania POZ](#) zostaną uzupełnione na podstawie danych ze skierowania.
- Brak zaznaczenia - [badania POZ](#) zostaną uzupełnione zgodnie z wynikiem przesłanym przez laboratorium.

Wszystkie pliki zleceń wysyłane z programu mMedica i wyniki odbierane od laboratorium mogą być zapisywane w folderze wskazanym w polu: "Folder na kopie dokumentów HL7 CDA".

Rozdział

3

Dodanie zlecenia w Gabinetcie


Ścieżka: [Gabinet](#) > [Pacjent](#) > [Skierowania](#) > [Badania lab.](#)

Ścieżka: [Gabinet](#) > [Pacjent](#) > [Skierowania](#) > [Badania dag.](#)

Ścieżka: [Gabinet](#) > [Pacjent](#) > [Skierowania](#) > [Badanie cytologiczne](#)

Po poprawnej konfiguracji aplikacji można rozpocząć wystawianie zleceń do laboratorium/pracowni diagnostycznej. Odbywa się ono poprzez wystawienie skierowania z poziomu wizyty gabinetowej. W niniejszej instrukcji opisano tylko problematykę wystawienia zlecenia elektronicznego. Pełna ścieżka konfiguracji oraz obsługi Gabinetu została omówiona w [instrukcji obsługi](#) programu mMedica.

Po otwarciu wizyty w Gabinetcie należy wybrać odpowiednie skierowanie - na badania laboratoryjne, diagnostyczne lub badanie cytologiczne. W polu "Do laboratorium"/ "Do pracowni diagnostycznej" za

pomocą przycisku  należy wybrać instytucję, do której skierowane zostanie elektroniczne zlecenie.

Ponadto, w przypadku zlecenia na badania laboratoryjne, należy określić czy skierowanie wymaga pobrania materiału w lokalnym punkcie pobrań.

Parametr "**Wymaga pobrania materiału**" oznacza:

- Zaznaczenie parametru - zlecenie pobrania materiału zostanie skierowane do lokalnego [punktu pobrań](#). Na wydruku skierowania zostanie zamieszczona informacja: "Materiał pobierany u świadczeniodawcy".
- Brak zaznaczenia - zlecenie zostanie przekazane do punktu zleceń, a następnie wysłane do laboratorium. Na wydruku skierowania zostanie zamieszczona informacja: "Materiał pobierany w laboratorium".

Dodanie zlecenia w Gabiniecie

Funkcje dodatkowe

Dane pacjenta Dokumenty ubezpieczenia Aktualizuj dane Status eWUŚ Rozliczenie wizyty

Kowalski Jan (M), 48 lat
23-09-2021 11:44 – 11:59, PORADNIA LEKARZA POZ, Nowak Anna

Badania lab. Badania diag. Do specjalisty Do szpitala Do szpitala psych. Zabiegi rehab. Transport Transport > 120km Op. długotr.

1 (nowe)

Dane ogólne

Nr umowy: Bez refundacji NFZ Cito

Do laboratorium: 932382 ... Laboratorium testowe Wymaga pobrania materiału

Liczba wykonań: Do dnia: Interwał: Częstość:

Daty zleceń:

Schematy badań

Nazwa	
Morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi	<input checked="" type="checkbox"/>

Uwagi: krytyczny stan zdrowia pacjenta

Zalecenia:

Miejsce przesłania wyniku / osoba upoważniona do odbioru wyniku: NZOZ "Eskulap" 40-001 Katowice, ul. Wojewódzka

Istotne dane kliniczne pacjenta: systematyczne przyjmowanie leku Pentasa

Dokumenty medyczne Dane podstawowe Zalecenia Wyślij do laboratorium Drukuj skierowanie EDM Autoryzuj Umów następną

Kolejnym krokiem jest wybór badań do zlecenia. Na skierowaniu do laboratorium dodaje się je za pomocą przycisku **Dodaj badanie(a)**. Po jego wyborze otwarte zostanie okno *Badania laboratoryjne - wielowybór*, zawierające słownik badań laboratoryjnych. Na prezentowanej liście należy zaznaczyć badania, które mają znaleźć się na skierowaniu i zatwierdzić wybór przyciskiem **Wybierz**.

Badania laboratoryjne - wielowybór

Kod lub nazwa: Grupa:

Tylko aktualne Tylko refundowane


Widok: 1 Preferowane 2 Ostatnio wybierane 3 Wszystkie

Kod	Nazwa	Material	Grupa	Procedura
BIS001	Albumina	Surowica	Badania bioc...	I09
BIS002	Aminotransferaza alaninow...	Surowica	Badania bioc...	I17
BIS003	Aminotransferaza asparagi...	Surowica	Badania bioc...	I19
• BIS004	Amylaza	Surowica	Badania bio...	I25
BIS005	Antygen HBs-AgHBs	Surowica	Badania bioc...	V39
• KAL003	Badanie ogólne	Kał	Badanie kału	A23
BIS006	Białko C-reaktywne (CRP)	Surowica	Badania bioc...	I81
BIS007	Białko całkowite	Surowica	Badania bioc...	I77
BIS008	Bilirubina bezpośrednia	Surowica	Badania bioc...	I87
BIS009	Bilirubina całkowita	Surowica	Badania bioc...	I89
› BIS010	Cholesterol-HDL	Surowica	Badania bio...	K01
BIS011	Cholesterol-LDL	Surowica	Badania bioc...	K03
BIS012	Cholesterol całkowity	Surowica	Badania bioc...	I99
BIS015	Fosfataza kwaśna całkowit...	Surowica	Badania bioc...	L15

Wybierz (F5) Wyjście

W razie konieczności pilnego wykonania badania należy zaznaczyć checkbox **"Cito"**, a gdy pacjent pokrywa pełne koszty badania (skierowanie nie będzie finansowane ze środków publicznych) - checkbox **"Bez refundacji NFZ"**. Informacje te, a także dane wprowadzone w polach **"Uwagi"** oraz **"Istotne dane kliniczne pacjenta"** zostaną przekazane w pliku elektronicznego zlecenia.



Po uzupełnieniu danych i autoryzacji wizyty, za pomocą przycisku , zlecenie na badania laboratoryjne niewymagające pobrania materiału u świadczeniodawcy oraz zlecenie na badania diagnostyczne zostaną przekazane do [przeglądu zleceń](#), skąd nastąpi wysyłka do instytucji zewnętrznej. Natomiast zlecenie na badania laboratoryjne z zaznaczoną koniecznością pobrania materiału zostanie przekazane do [punktu pobrań](#) w celu pobrania materiału do badań.


W oknie skierowania na badania laboratoryjne dostępny jest przycisk umożliwiający przekazanie zlecenia do przeglądu zleceń lub do punktu pobrań przed autoryzacją wizyty. Przycisk ten znajduje się na dole ekranu i ma nazwę **Wyślij do laboratorium**, jeżeli nie zostało zaznaczone pole "Wymagaj pobrania materiału", lub **Wyślij do punktu pobrań**, w przypadku jego zaznaczenia.

W wersji aplikacji 8.3.0 w *Rejestrze instytucji* na zakładce [Konfiguracji wymiany danych](#) został dodany parametr **Przeład z gabinetu**. Należy go włączyć, jeżeli po wyborze przycisku **Wyślij do laboratorium** przy wystawianiu skierowania na zakładce **Badania lab.** zlecenie ma być przekazane do laboratorium bezpośrednio z poziomu Gabinetu. Jeżeli taka wysyłka przebiegnie pomyślnie, zlecenie wyświetli się w przeglądzie zleceń ze statusem "Wysłane". W przypadku błędu wysyłki wyświetli się komunikat informujący o jej przyczynie i zlecenie będzie później widoczne w przeglądzie zleceń jako oczekujące do wysłania przez zadanie automatycznego wysyłania zleceń (realizowane przez usługę mmService).

W wersji 8.3.0 umożliwiono wygenerowanie zlecenia do zintegrowanej pracowni diagnostycznej również za pomocą przycisku **Wyślij skierowanie**, dostępnego na dole zakładki skierowania **Badania diag..** Równocześnie sposób działania przycisku został zmodyfikowany. Obecnie jest on uzależniony od wartości

Dodanie zlecenia w Gabinetcie

wskazanej w polu "Sposób wysyłki" w danych grupy badań powiązanej w *Słowniku badań diagnostycznych* z badaniem, na które pacjent jest kierowany.

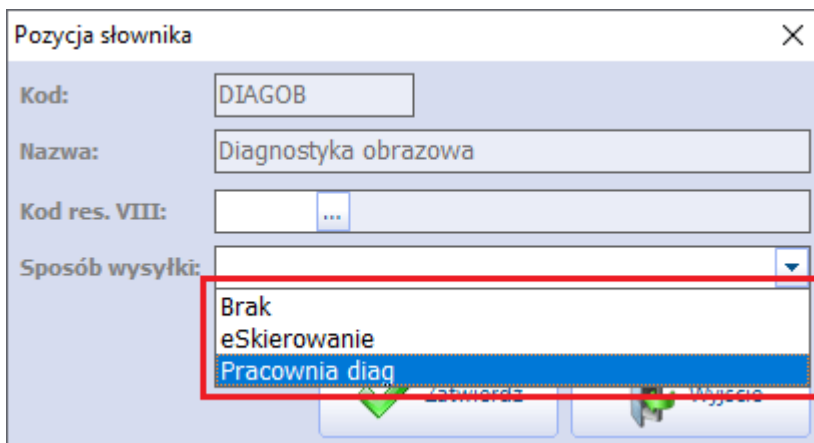

Pozycja słownika

Kod:

Nazwa:


Kod res. VIII:

Sposób wysyłki:

Brak
eSkierowanie
Pracownia diag

Warunkiem wygenerowania za pomocą przycisku **Wyślij skierowanie** zlecenia do wskazanej pracowni diagnostycznej, zintegrowanej w ramach modułu eWyniki, jest powiązanie wybranego w skierowaniu badania z grupą, dla której ustawiono sposób wysyłki **"Pracownia diag"**. W przeciwnym wypadku przycisk będzie nieaktywny (sposób wysyłki "Brak") lub zostanie wygenerowane e-Skierowanie (sposób wysyłki "eSkierowanie").

W wersji 8.2.0 aplikacji mMedica w ramach modułu "eWyniki Lab" udostępniono funkcjonalność wysyłania do zintegrowanego laboratorium elektronicznego zlecenia na badanie cytologiczne, którego dane uzupełniane są w Gabinetcie na zakładce *Badanie cytologiczne*.

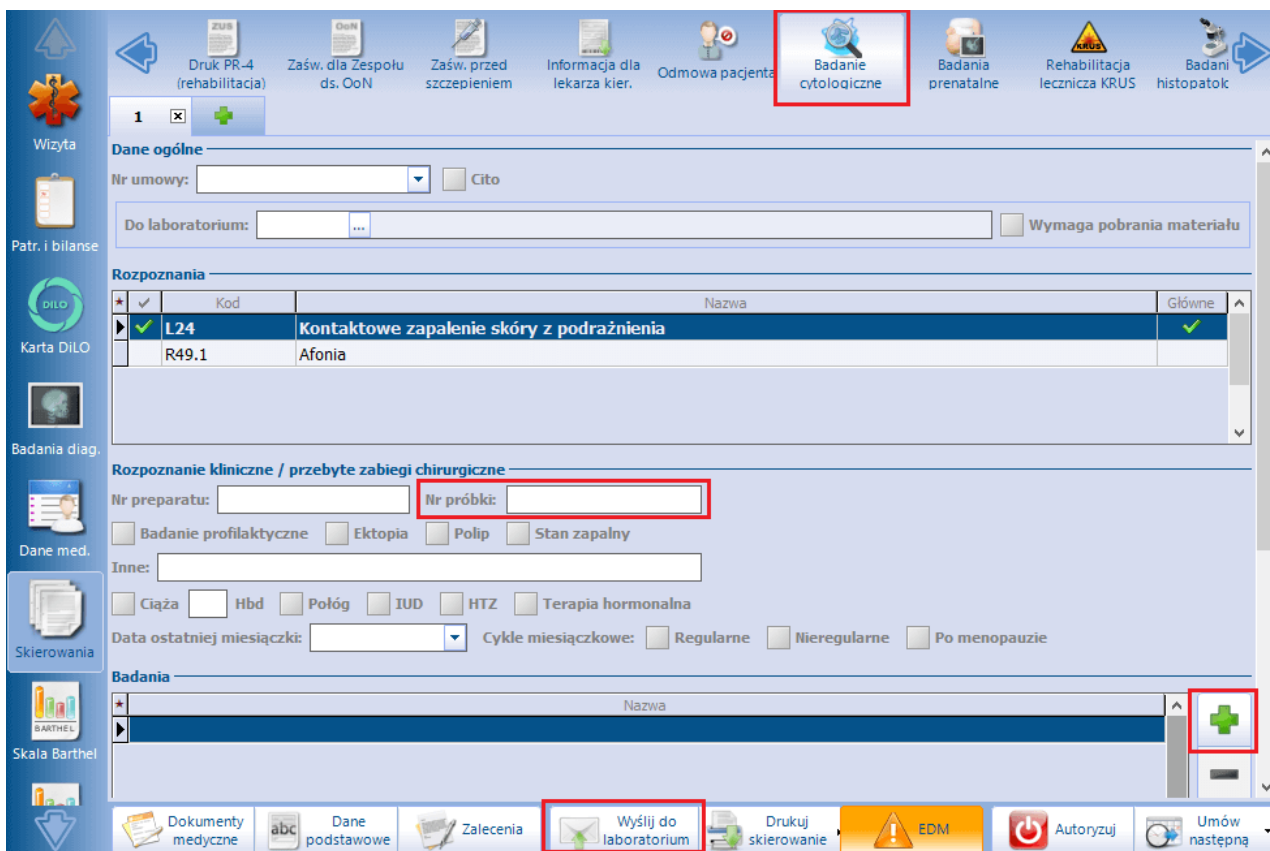

Wizyta

Patr. i bilanse

Karta DILO

Badania diag.

Dane med.

Skierowania

Skala Barthel

Druk PR-4 (rehabilitacja) Zaśw. dla Zespołu ds. OoN Zaśw. przed szczepieniem Informacja dla lekarza kier. Odmowa pacjenta **Badanie cytologiczne** Badania prenatalne Rehabilitacja lecznicza KRUS Badani histopatok

1

Dane ogólne

Nr umowy: Cito

Do laboratorium: Wymaga pobrania materiału

Rozpoznanie

*	✓	Kod	Nazwa	Główne
▶	✓	L24	Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia	✓
		R49.1	Afonia	

Rozpoznanie kliniczne / przebyte zabiegi chirurgiczne

Nr preparatu: Nr próbki:

Badanie profilaktyczne Ektopia Polip Stan zapalny

Inne:

Ciąża Hbd Połóg IUD HTZ Terapia hormonalna

Data ostatniej miesiączki: Cykle miesięczkowe: Regularne Nieregularne Po menopauzie


Badania

*	Nazwa
---	-------

Dokumenty medyczne abc Dane podstawowe Zalecenia **Wyślij do laboratorium** Drukuj skierowanie EDM Autoryzuj Umów następną

Dokładny opis powyższej zakładki znajduje się w [instrukcji obsługi](#) programu mMedica, w rozdziale "Badanie cytologiczne".

Aby zlecenie elektroniczne do laboratorium mogło zostać wygenerowane, należy w polu "Do laboratorium" wybrać odpowiednią instytucję oraz uzupełnić pole "Nr próbki". Od wersji 8.5.0 aplikacji mMedica wymagane jest również wskazanie przynajmniej jednego rozpoznania w sekcji [Rozpoznania](#).


Ponadto konieczne jest uzupełnienie sekcji [Badania](#). W tym celu należy skorzystać ze słownika badań cytologicznych, wyświetlanego po wyborze przycisku . Słownik ten zawiera badania przypisane do grupy: "Badanie cytologiczne". Użytkownik, posiadający odpowiednie uprawnienia, ma możliwość dodawania do niego brakujących pozycji.


Jeżeli wszystkie wymagane dane zostaną wprowadzone, generacja zlecenia i przekazanie go do [przeglądu zleceń](#) nastąpi po autoryzacji wizyty lub po skorzystaniu z przycisku **Wyślij do laboratorium**.

W wersji 9.0.0 aplikacji mMedica w omawianym oknie został udostępniony parametr **"Wymaga pobrania materiału"**, umożliwiający przekazanie zlecenia do punktu pobrań. Jego działanie jest analogiczne jak w przypadku skierowania na badania laboratoryjne. Jeżeli zlecenie na badanie cytologiczne ma być przekierowane do punktu pobrań, nie należy uzupełniać numeru próbki w polu "Nr próbki" - włączenie parametru powoduje blokadę jego edycji.

3.1 Zlecenie cykliczne


Aplikacja mMedica umożliwia generowanie cyklicznych zleceń na badania laboratoryjne. Dzięki określeniu częstotliwości wykonań i daty obowiązywania, skierowanie przekazywane jest do laboratorium jako zlecenie stałe.

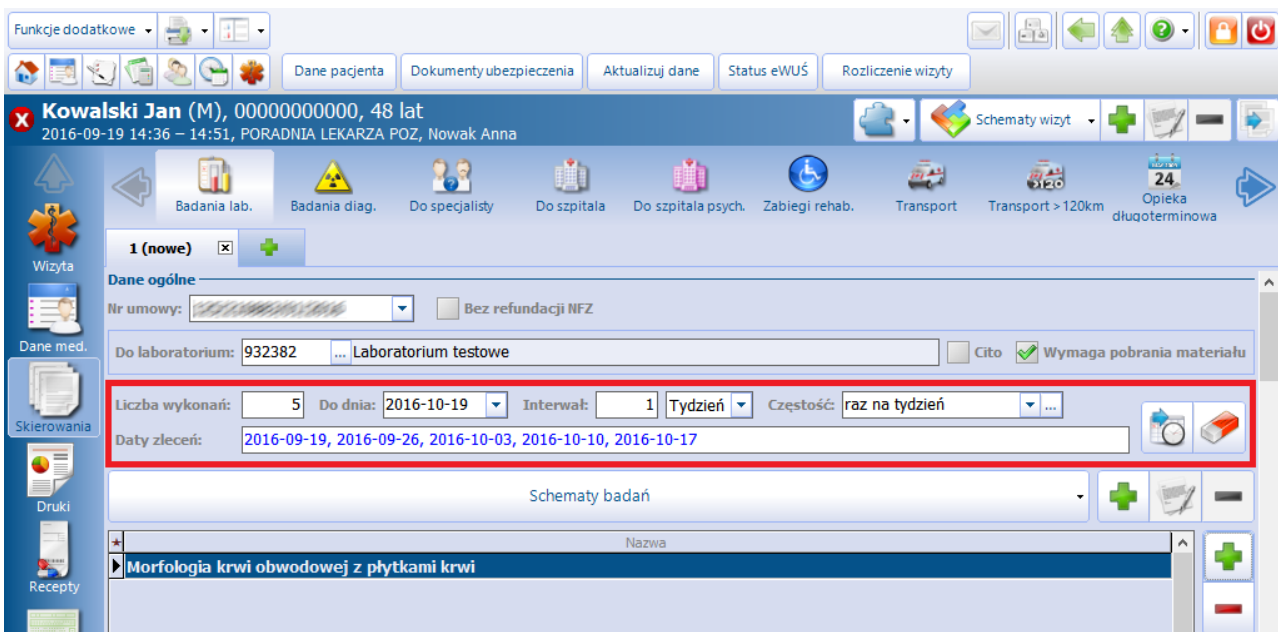

W celu wygenerowania stałego zlecenia należy uzupełnić pola określające liczbę wykonań, datę obowiązywania zlecenia, interwał czasowy (dzień, tydzień, miesiąc), częstość wykonania badania. Po uzupełnieniu wymienionych pól należy wygenerować daty zleceń, do czego służy przycisk  **Generuj daty zleceń**. W polu "Daty zleceń" wyświetlone zostaną daty zleceń stałych, z uwzględnieniem warunków zadanych przez użytkownika.

W przypadku braku uzupełnienia pola "Interwał", aplikacja mMedica wyliczy daty zleceń w równych odstępach na podstawie daty ważności skierowania i liczby wykonań.

W przypadku braku uzupełnienia jednego z wymaganych pól, wyświetlony zostanie następujący komunikat:

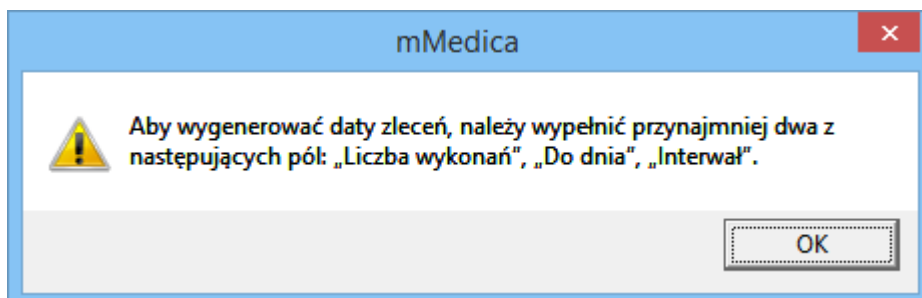

W celu usunięcia wygenerowanych dat zleceń należy skorzystać z przycisku  **Usuń daty zleceń.**

Autoryzacja wizyty powoduje wygenerowanie zleceń stałych do laboratorium, zgodnie z zadanymi warunkami. Wystawione zlecenia przekierowane zostaną do formatki [Przeglądu zleceń](#) w ilości odpowiadającej zdefiniowanej liczby wykonań.

Jeśli na skierowaniu zostanie zaznaczony parametr "Wymaga pobrania materiału", wygenerowane zlecenie przekazane zostanie do [Punktu pobrań](#). Aplikacja mMedica będzie przekazywać cyklicznie zlecenie do punktu pobrań zgodnie z wygenerowanymi datami.

Usunięcie z wizyty skierowania, dla którego został wygenerowany cykl zleceń, spowoduje anulowanie wszystkich zleceń z cyklu.

Rozdział

4

Punkt pobrań w mMedica

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Integracja](#) > [Punkt pobrań](#)

W przypadku badań laboratoryjnych, gdy [zlecenie](#) wymaga pobrania materiału, należy przejść do *Punktu pobrań* celem uzupełnienia numeru próbki.

4.1 Pobranie materiału

Na formatce *Punkt pobrań* prezentowana jest lista zleceń wymagających pobrania materiału **(1)**. Po podświetleniu dowolnego zlecenia, w oknie *Badania* zostaną wyświetlone badania, zawierające się w tym zleceniu **(2)**. Natomiast w oknie *Próbki* **(3)** wyświetlana jest lista materiałów, do których należy przypisać numer pobrania.

Dodatkowo w sekcji *Uwagi* **(4)** wyświetlane są istotne dane kliniczne pacjenta oraz uwagi, które zostały naniesione na skierowaniu przez lekarza zlecającego. Uwagi do zlecenia mogą zostać zmodyfikowane przez osobę pobierającą, natomiast dane kliniczne pacjenta (opisane [niebieską](#) czcionką) są nieedytowalne.

W wersji 5.15.0 aplikacji mMedica dodano filtr "Oczekujące", którego zaznaczenie powoduje wyświetlenie zleceń z datą przypadającą w przyszłości. Użycie filtra przydatne jest w przypadku konieczności wyszukania zleceń cyklicznych, dla których zaplanowano pobranie materiału.

Punkt pobrań w mMedica

Funkcje dodatkowe

Dodaj zlecenie Rozbij zlecenie Anuluj zlecenie Anuluj badanie Rozlicz

Punkt pobrań

Zlecenia

Oczekujące

Nr zlecenia	Pacjent	PESEL	Data zlec.	Refund.
00003706...	Kowalski Jan	00...	2016-09-21	✓
000037064...	Kowalski Jan	76...	2016-09-19	✓
000037062...	Kowalski Jan	43...	2016-09-12	✓
000037054...	Kowalski Jan	29...	2016-09-12	✓
000037058...	Kowalski Jan	78...	2016-09-12	✓
000037061...	Kowalski Jan	56...	2016-09-12	✓
000037050...	Kowalski Jan	70...	2016-09-12	✓
000037057...	Kowalski Jan	75...	2016-09-12	✓
000037062...	Kowalski Jan	70...	2016-09-12	✓
000037054...	Kowalski Jan	54...	2016-09-12	✓
000037057...	Kowalski Jan	8...	2016-09-12	✓
000037054...	Kowalski Jan	49...	2016-09-12	✓
000037042...	Kowalski Jan	85...	2016-09-09	✓
000037029...	Kowalski Jan	38...	2016-09-08	✓
000037032...	Kowalski Jan	66...	2016-09-08	✓
000037018...	Kowalski Jan	48...	2016-09-08	✓
000037016...	Kowalski Jan	79...	2016-09-08	✓
000037044...	Kowalski Jan	58...	2016-09-09	✓
000037041...	Kowalski Jan	69...	2016-09-09	✓
000037029...	Kowalski Jan	38...	2016-09-08	✓
000037032...	Kowalski Jan	66...	2016-09-08	✓
000037018...	Kowalski Jan	48...	2016-09-08	✓
000037016...	Kowalski Jan	79...	2016-09-08	✓
000037012...	Kowalski Jan	64...	2016-09-08	✓
000037015...	Kowalski Jan	32...	2016-09-08	✓

Komórka

PSR Gabinet Pielęgniarski

Pobierający

NOWAKA Nowak Anna

Badania

Laboratorium: Laboratorium TESTOWE

Kod	Nazwa
BIS002	Aminotransferaza alaninowa (ALT)
BIS012	Cholesterol całkowity
BIS019	Glukoza
BIS022	Kreatynina
BIS026	Potas
BIS033	Triglicerydy (TG)
HEM001	Morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
HEM003	Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Uwagi

systematyczne przyjmowanie leku Pentasa

krytyczny stan zdrowia pacjenta


Próbki

Krew 0000000003


Surowica 0000000004

Odśwież Ostatnio odświeżono: 3 min temu Autoryzuj

W celu uzupełnienia numeru próbki należy wybrać zlecenie znajdujące się z lewej strony okna, a następnie wpisać identyfikator pobrania w oknie *Próbki*. Numer próbki można wprowadzić ręcznie lub za pomocą czytnika kodów kreskowych. Identyfikator próbki powinien być unikalny. W przypadku powtórzenia numeru próbki, użytkownik może się spotkać z komunikatem:

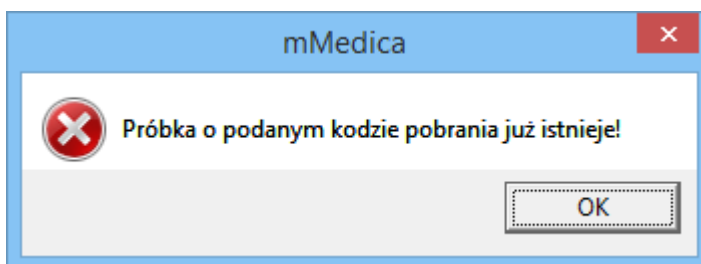


Uwaga! Powyższa walidacja nie obowiązuje w sytuacji, gdy pobrany materiał o tym samym numerze próbki wysyłany jest do różnych laboratoriów. Od wersji 6.8.0 aplikacji mMedica istnieje także możliwość przypisania tego samego numeru próbki do różnych zleceń tego samego pacjenta pod warunkiem, że są one wystawione w tym samym dniu i dotyczą tego samego laboratorium. W takim wypadku wyświetli się ostrzeżenie:

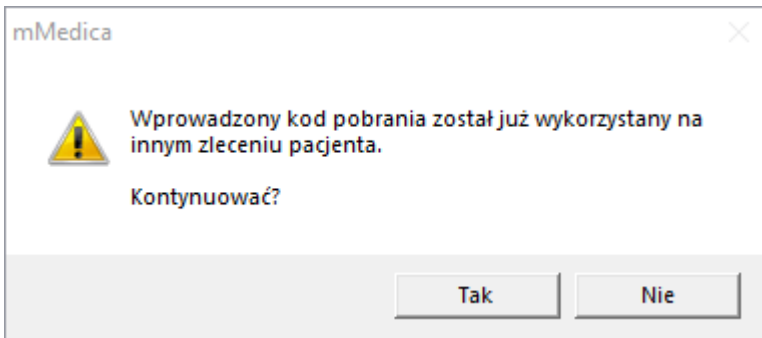

Wybór przycisku **Tak** umożliwi autoryzację wpisanego identyfikatora i przekierowanie zlecenia do wysłania. Naciśnięcie **Nie** spowoduje usunięcie wpisu.

Obok numeru próbki wyświetlana jest nazwa materiału znajdującego się w zleceniu, np. krew, surowica, wymaz, mocz, kał. Jeśli w [Przeglądzie instytucji](#) zaznaczony zostanie parametr "**Jeden identyfikator pobrania dla wszystkich materiałów**", to zamiast nazwy materiału wyświetlany będzie napis "**Materiał zbiorczy**" (zdj. poniżej). W tej sytuacji nadaje się jeden numer próbki, natomiast w przypadku "rozbicia" materiału, należy nadać osobne numery dla każdej próbki (jak na zdj. powyżej).

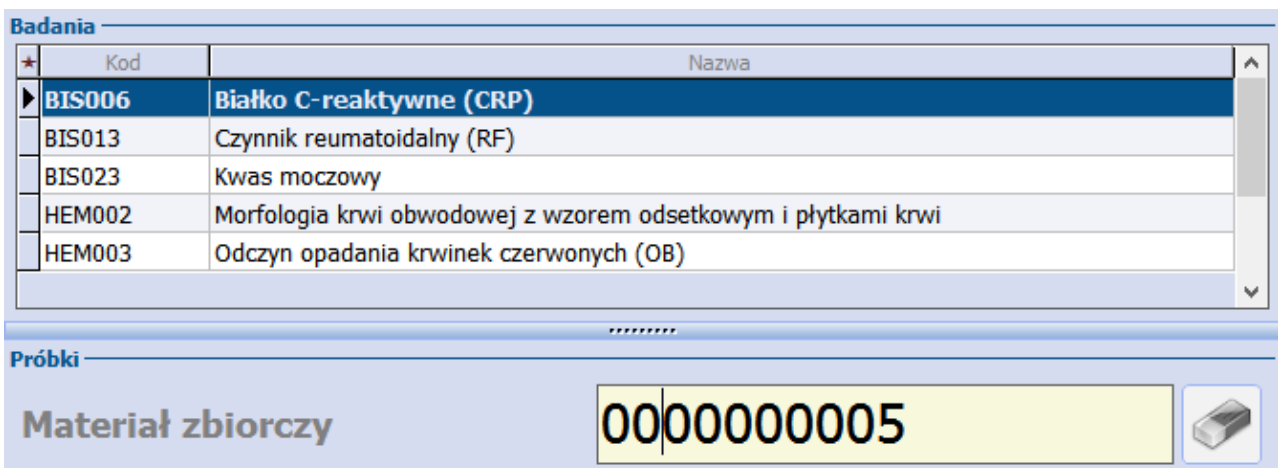


Opis działania następujących pól:

Komórka

PSR ... Gabinet Pielęgniarski

Pobierający


NOWAKA ... Nowak Anna

Moduł eWyniki oferuje funkcję automatycznego ewidencjonowania pobrania materiału w księdze zabiegowej placówki. W tym celu należy w polu "**Komórka**" za pomocą przycisku  wskazać komórkę organizacyjną, która jest powiązana z księgą zabiegów, następnie uzupełnić numer próbki i autoryzować dane. Aby komórka organizacyjna podpowiadała się w polu domyślnie, należy dokonać odpowiednich ustawień w [Konfiguratorze](#) programu.

W polu "**Pobierający**" wskazuje się dane personelu pobierającego materiał - domyślnie jest nim osoba zalogowana do aplikacji.


Przycisk **Rozlicz** znajdujący się w górnym panelu okna służy do rozliczenia badań prywatnych pacjentów - funkcjonalność jest dostępna w dodatkowym Module Komercyjnym.



Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy zapisać dane za pomocą przycisku . W wyniku tego działania zlecenie zostanie przekazane do [Przeglądu zleceń](#), a następnie wysłane do laboratorium.

4.2 Ręczne dodanie zlecenia

Z poziomu formatki *Punkt pobrań* istnieje możliwość dodania zlecenia, z pominięciem ścieżki związanej z wystawieniem skierowania. Służy do tego przycisk **Dodaj zlecenie**, znajdujący się w górnej części formatki. Program przekieruje użytkownika do okna *Słownik pacjentów* w celu wybrania pacjenta, dla którego będzie generowane zlecenie pobrania materiału.

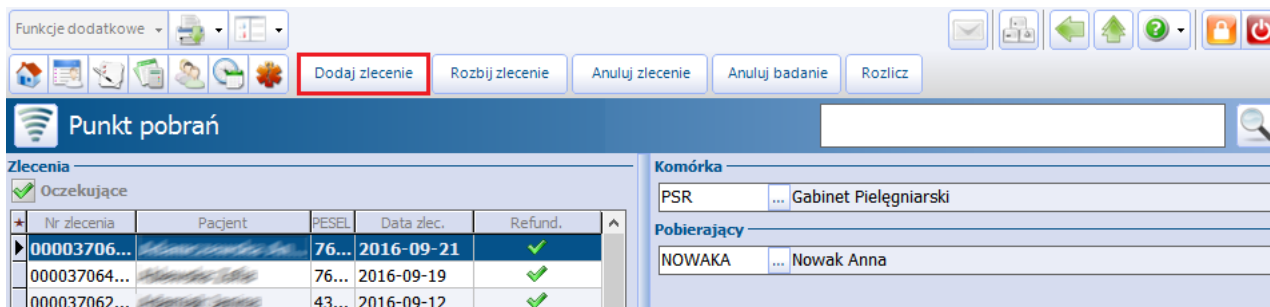

The screenshot shows the 'Punkt pobrań' window in the mMedica application. At the top, there is a menu bar with 'Funkcje dodatkowe' and a toolbar with icons for home, print, back, forward, help, and power. Below the toolbar, there are several buttons: 'Dodaj zlecenie' (highlighted with a red box), 'Rozbij zlecenie', 'Anuluj zlecenie', 'Anuluj badanie', and 'Rozlicz'. The main area is divided into two sections: 'Zlecenia' and 'Komórka'. The 'Zlecenia' section shows a table of orders with columns for 'Nr zlecenia', 'Pacjent', 'PESEL', 'Data zlec.', and 'Refund.'. The 'Komórka' section shows a search for 'PSR' and 'Gabinet Pielęgniarski'.

Nr zlecenia	Pacjent	PESEL	Data zlec.	Refund.
00003706...	[blurred]	76...	2016-09-21	✓
000037064...	[blurred]	76...	2016-09-19	✓
000037062...	[blurred]	43...	2016-09-12	✓

Po wyborze pacjenta otwarte zostanie okno *Zlecenie badania laboratoryjnego*, w którym należy wprowadzić datę zlecenia badania, laboratorium, do którego zostanie przekazana próbka oraz wskazać personel zlecający badanie. Oprócz tego za pomocą opcji "Cito" i "Refundowane" istnieje możliwość oznaczenia refundacji i niezwłoczności wykonania badania.

Ostatnim krokiem jest wybór badań do zlecenia, które dodaje się za pomocą przycisku  **Dodaj badanie**.

Zlecenie badania laboratoryjnego

Pacjent: * Kowalski Jan PESEL: * []

Nr zlecenia: * [] Data: * 10-03-2022

Laboratorium: * []

Komórka: * []

Zlecający: * []

Cito Refundowane

Badania

Schematy badań


Kod	Nazwa
BIS020	Hormon tyreotropowy (TSH)
BIS016	FT3
BIS017	FT4


Zatwierdź Wyjście

W wersji 8.1.0 aplikacji mMedica, w wersji Plus (+) programu, w oknie dodawania zlecenia udostępniono możliwość korzystania ze schematów badań. Funkcjonalność ta została dokładnie opisana w [ogólnej instrukcji](#) obsługi programu, w rozdziale "Badania laboratoryjne".

Po dodaniu zlecenia należy uzupełnić numer próbki i autoryzować dane. W wyniku tych działań zlecenie zostanie przekazane do [Przeglądu zleceń](#), a następnie wysłane do laboratorium.

4.3 Anulowanie wybranego badania

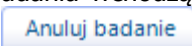W razie konieczności anulowania badania wchodzącego w skład zlecenia, należy zaznaczyć je na liście, a następnie skorzystać z przycisku , znajdującego się w górnym panelu formatki *Punkt pobrań*. W otwartym oknie dialogowym *Anuluj badanie* podać przyczynę w formie tekstowej.

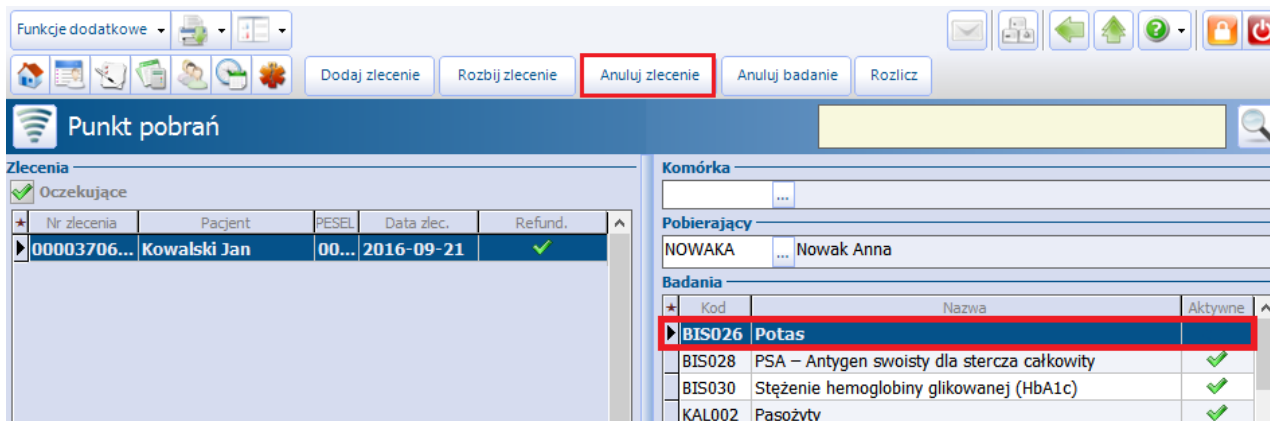


Anulowanie badania spowoduje usunięcie zaznaczenia [✓] w kolumnie "Aktywne". Tak anulowanie badania nie będą wysyłane do laboratorium w ramach zlecenia.

4.4 Rozbicie zlecenia

Z poziomu formatki *Punktu pobrań* istnieje możliwość rozbicia zlecenia na poszczególne zlecenia. Rozbiciu podlegają zlecenia, które zawierają co najmniej dwa badania.

Zaleca się korzystanie z funkcjonalności w następujących sytuacjach:

- gdy istnieje konieczność przesłania do laboratorium badań na osobnych zleceniach,
- gdy istnieje konieczność wykonania poszczególnych badań laboratoryjnych w różnych laboratoriach.

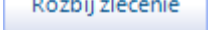W celu rozbicia zlecenia należy zaznaczyć je na liście, następnie wybrać przycisk , znajdujący się w górnym panelu formatki *Punkt pobrań*. Zostanie otwarte okno *Rozbij zlecenie* prezentujące szczegółowe dane zlecenia i badań, które zostały zlecone przez lekarza na skierowaniu.

Rozbij zlecenie

Kowalski Jan PESEL: 00000000000
Data ur.: 1968-09-16 Płeć: M

Zlecenia

★ Refund.	Nr zlecenia	Laboratorium	Data zlec.	Status
▶ ✓	00001156920626852709	Laboratorium testowe	2017-06-14	Do pobrania

Badania

★	Grupa	Kod	Nazwa
▶	Badania biochemiczne i immunochemiczne	BIS012	Cholesterol całkowity
	Badania mikrobiologiczne	MIK003	Posiew wymazu z gardła z antybiogramem

W sekcji *Badania* należy zaznaczyć badania, które mają zostać przeniesione na nowe zlecenie i wybrać



przycisk **Przenieś badania na nowe zlecenie**. W razie konieczności przeniesienia kilku badań należy dokonać wielowyboru, poprzez przytrzymanie na klawiaturze przycisku CTRL i zaznaczenie badań na liście lewym przyciskiem myszki.


Kolejnym krokiem jest wskazanie laboratorium ze słownika instytucji, z którym zintegrowana jest placówka medyczna zlecająca badania. Po wykonaniu tych czynności w oknie *Rozbij zlecenie* zostanie dodane nowe zlecenie, zawierające automatycznie wygenerowany numer zlecenia.

Uwaga! W programie istnieje mechanizm automatycznego rozbijania skierowań na pojedyncze zlecenia. W przypadku dodania na skierowanie badania, które w [słowniku badań laboratoryjnych](#) zostało oznaczone jako **"Osobne zlecenie"**, zostanie wygenerowane osobne zlecenie z unikalnym numerem zlecenia, zawierające to badanie.

4.5 Zmiana laboratorium docelowego

W wersji 6.0.0 aplikacji mMedica umożliwiono zmianę laboratorium docelowego, do którego ma zostać przekazana próbka.

W głównym oknie Punktu pobrań wyświetlana jest informacja o laboratorium, do którego pierwotnie skierowano zlecenie na badania laboratoryjne, zaznaczone na liście zleceń.

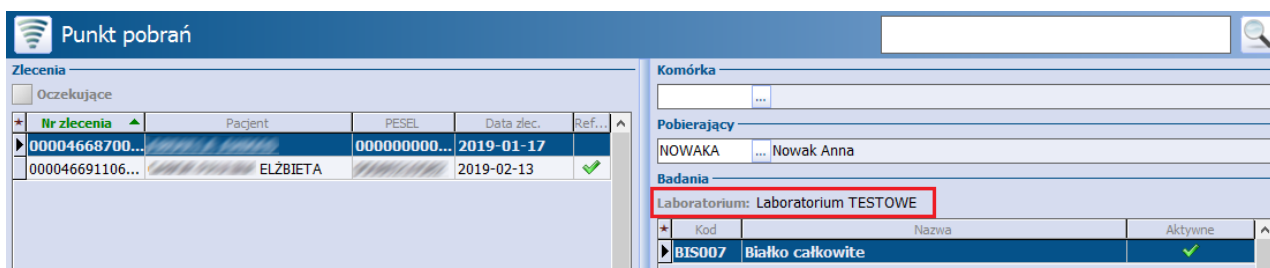

Jeśli istnieje konieczność zmiany laboratorium na zleceniu, należy podświetlić je na liście i otworzyć poprzez dwukrotne kliknięcie. Otwarte zostanie okno dialogowe *Zlecenie badania laboratoryjnego*, gdzie w polu "Laboratorium" należy kliknąć w przycisk słownika i wybrać inną instytucję.

Jeśli zmiana laboratorium następuje po uzupełnieniu już numeru próbki na zleceniu, wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy o usunięciu wprowadzonych numerów próbek.

Rozdział

5

Przegląd zleceń

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Integracja](#) > [Przegląd zleceń](#)

Do *Przeglądu zleceń* przekazywane są następujące zlecenia:

- zlecenie wykonania badań diagnostycznych wystawione w Gabinetcie
- zlecenie wykonania badań laboratoryjnych wystawione w Gabinetcie
- autoryzowane zlecenie przekazane z [Punktu pobrań](#), po pobraniu materiału i nadaniu numeru próbki

W górnym oknie formatki wyświetlane są zlecenia wykonania badań, jakie zostały wystawione przez użytkownika wraz ze szczegółowymi informacjami. Zlecenia wyświetlane są na podstawie domyślnego statusu "Oczekujące" i "Wysłane", który można zmienić w filtrze panelu *Wyszukiwanie zaawansowane*.

Od wersji 8.4.0 aplikacji mMedica istnieje możliwość skopiowania numeru zlecenia. W tym celu należy kliknąć w dany wiersz prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję **"Kopiuje nr zlecenia"**. Inną metodą jest podświetlenie zlecenia na liście i skorzystanie ze skrótu klawiszowego Ctrl + C.

W dolnym oknie *Badania w zleceniu* prezentowane są badania, jakie zostały zlecone w ramach zlecenia wybranego w górnym oknie. W polu "Uwagi" wyświetlane są uwagi i istotne dane kliniczne pacjenta ze [skierowania](#) wystawionego przez lekarza w Gabinetcie.

Dane prezentowane na formatce można zawęzić za pomocą filtrów znajdujących się w panelu *Wyszukiwanie zaawansowane*.

The screenshot displays the 'Przegląd zleceń' (Orders Overview) section of the mMedica software. The interface includes a search panel on the left with filters for patient, date, and status. The main area shows a table of orders with columns for order number, date, patient name, PESEL, status, and laboratory. Below this, the 'Badania w zleceniu' (Tests in Order) section shows a detailed list of tests performed for a specific order, including test codes, names, sample numbers, and collection dates. The 'Uwagi' (Remarks) section at the bottom contains clinical notes.

Nr zlecenia	Data zlec.	Data wpisu	Pacjent	PESEL	Status	Rodzaj	Cito	Refund.	Zlecający	Komórka zlecająca
0000370...	2016-09-21	2016-09-21 09:...	Kowalski Jan	000...	Oczekujące	Laborat...		✓	Nowak An...	Gabinet Położnej..
00003435...	2016-03-03	2016-03-03 08:40		730...	Wysłane	Laborato...		✓		Poradnia Medycyny..
00003424...	2016-02-25	2016-02-25 09:27		860...	Wysłane	Laborato...		✓		Poradnia Medycyny..
00003403...	2016-02-12	2016-02-12 12:56		390...	Wysłane	Laborato...		✓		Poradnia Medycyny..
00003351...	2016-01-13	2016-01-13 19:11		491...	Wysłane	Laborato...		✓		Poradnia Endokryn...
00003338...	2016-01-05	2016-01-05 08:57		550...	Wysłane	Laborato...		✓		Poradnia Medycyny..
00003336...	2016-01-04	2016-01-04 09:26		620...	Wysłane	Laborato...		✓		Poradnia Medycyny..



Kod	Nazwa	Próbka	Data pobrania	Pobierający
BIS002	Aminotransferaza alaninowa (ALT)	0000000004	2016-09-21 09:37	Nowak Anna
BIS012	Cholesterol całkowity	0000000004	2016-09-21 09:37	Nowak Anna
BIS019	Glukoza	0000000004	2016-09-21 09:37	Nowak Anna
BIS022	Kreatynina	0000000004	2016-09-21 09:37	Nowak Anna
BIS026	Potas	0000000004	2016-09-21 09:37	Nowak Anna
BIS033	Triglicerydy (TG)	0000000004	2016-09-21 09:37	Nowak Anna
HEM001	Morfologia krwi obwodowej z płytkami ...	0000000003	2016-09-21 09:25	Nowak Anna
HEM003	Odczyn opadania krwinek czerwonych (...)	0000000003	2016-09-21 09:25	Nowak Anna

Uwagi
Istotne dane kliniczne: systematyczne przyjmowanie leku Pentasa
Uwagi: krytyczny stan zdrowia pacjenta

Wysłanie zleceń do instytucji zewnętrznej i odbiór wyników następują automatycznie co 5 minut, poprzez usługę mmService znajdującą się na serwerze. Częstotliwość synchronizacji wyników badań została zdefiniowana przez producenta oprogramowania domyślnie, jednakże użytkownicy posiadający Moduł

Przegląd zleceń


Menedżer eksportów mogą dokonać zmiany tego czasu według własnego uznania. Szczegółowa instrukcja Modułu Menedżer eksportów znajduje się na [stronie internetowej](#) produktu mMedica.

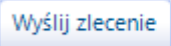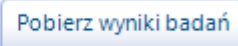Oprócz tego za pomocą przycisków   znajdujących się w górnym panelu okna, można dokonać ręcznego wysłania zleceń i pobrania wyników badań. W celu ręcznego wysłania kilku zleceń należy przytrzymać klawisz CTRL na klawiaturze i zaznaczyć je na liście, następnie kliknąć **Wyślij zlecenie**.

Opis przycisków znajdujących się w górnej części okna *Przegląd zleceń*:

- **Wyślij zlecenie** - rozpoczyna proces generacji pliku XML i eksportu danych do instytucji zewnętrznej wskazanej na zleceniu.
- **Pobierz wyniki badań** - rozpoczyna proces pobrania do programu mMedica wyników badań. Badania są importowane m.in. do [danych medycznych](#) pacjenta.
- **Anuluj zlecenie** - anuluje wybrane zlecenie, po uprzednim podaniu przyczyny [anulowania](#).
- **Skieruj do pobrania** - przenosi wybrane zlecenie do *Punktu pobrań* w celu uzupełnienia brakujących danych. Szczegóły w: [Skierowanie zlecenia do pobrania](#).
- **Drukuj wykaz** - wydrukowany zostanie wykaz wystawionych zleceń, na podstawie danych wyfiltrowanych na formatce.


W wersji 8.4.0 aplikacji mMedica w menu **Funkcje dodatkowe** została udostępniona opcja **"Przegeruj wyniki badań"**. Służy ona do ponownej generacji zaimportowanych wyników badań laboratoryjnych, które są nieprawidłowo wyświetlane w danych medycznych pacjenta.

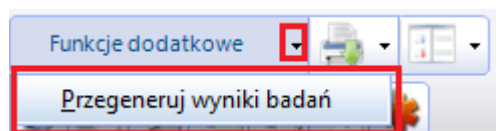

Jeżeli istnieją w bazie danych wyniki kwalifikujące się do przegerowania, po wyborze powyższej opcji wyświetli się okno **Ponowna generacja wyników badań** z listą badań i z możliwością ich wyfiltrowania po dacie wpisu. Po wyborze dostępnego na dole okna przycisku **Przegeruj** użytkownik będzie mógł określić, czy operacja ma być przeprowadzona dla wszystkich pozycji, czy tylko dla wskazanych na liście, zaznaczonych wcześniej za pomocą klawisza Ctrl i lewego przycisku myszy.


Jeżeli błędnie wyświetlany wynik został przypisany do wizyty, należy po jego przegerowaniu przejść do danych wizyty i powiązać z nią prawidłowy wynik w oknie jej dokumentów medycznych. Natomiast pozycję błędnego, anulowanego dokumentu (zaznaczoną na fioletowo) będzie można odłączyć od wizyty.

5.1 Skierowanie zlecenia do pobrania

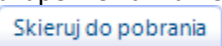Zlecenia, które wymagają pobrania materiału lub uzupełnienia numeru próbki mogą zostać z powrotem skierowane do [Punktu pobrań](#) za pomocą przycisku . Do pobrania można skierować tylko zlecenia w statusie "Oczekujące" i "Wysłane". Przycisk będzie nieaktywny dla zleceń wystawionych do instytucji (laboratorium), które w swojej definicji nie mają zaznaczonego parametru "Wymagaj pobrania materiału".


Aby wykonać omawianą operację użytkownik musi posiadać uprawnienie "Skierowanie wysłanego zlecenia do punktu pobrań", które nadaje się w: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Użytkownicy systemu](#) > [3. Uprawnienia funkcjonalne](#) > pozycja: [eWyniki](#).


5.2 Anulowanie zlecenia

W przypadku pomyłki istnieje możliwość anulowania zlecenia. Anulowanie może zostać przeprowadzone z poziomu [Punktu_pobrań](#) lub [Przeglądu_zleceń](#) poprzez wybranie przycisku . Podczas anulowania należy podać przyczynę w formie tekstowej (zdy. poniżej).

Ponadto z poziomu [Przeglądu_zleceń](#) istnieje możliwość anulowania kilku zleceń jednocześnie, poprzez przytrzymanie przycisku CTRL na klawiaturze i zaznaczenie lewym przyciskiem myszki wybranych zleceń. Dla wszystkich anulowanych w ten sposób zleceń zostanie dodana ta sama przyczyna anulowania.

W przypadku gdy użytkownik korzysta z integracji poprzez WebServices i zlecenie zostało już wysłane z programu mMedica, do dostawcy zostanie wysłana informacja o anulowaniu zlecenia wraz z podaniem jego przyczyny.

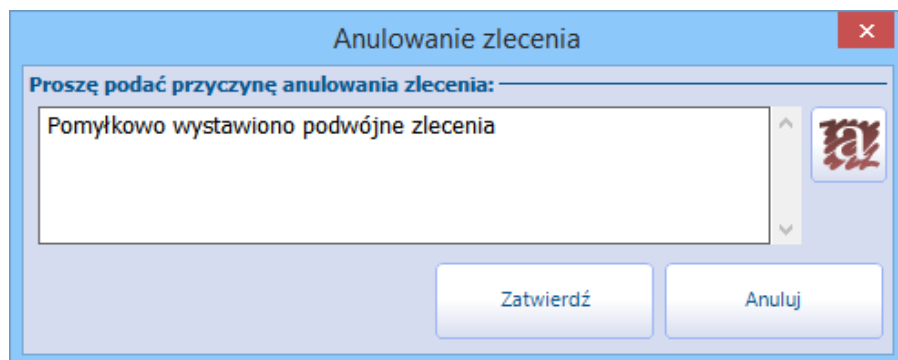

Przyczynę anulowania zlecenia można wprowadzić ręcznie lub skorzystać z wcześniej przygotowanych tekstów standardowych. Aby wybrać gotowy tekst standardowy należy kliknąć w przycisk  znajdujący się po prawej stronie okna *Anulowanie zlecenia*. Z otwartego okna dialogowego *Teksty standardowe - różne* należy dwukliknięciem wybrać jeden ze stworzonych tekstów i zapisać wybór przyciskiem **Zatwierdź**. Sposób tworzenia tekstów standardowych został szczegółowo opisany w [instrukcji obsługi](#) programu mMedica w rozdziale "Teksty standardowe w polach opisowych".

Rozdział

6

Ewidencja zleconych badań w mMedica

Ścieżka: [Rejestracja](#) > pacjent > [Dane medyczne](#)
[Ewidencja](#) > [Deklaracje](#) > [Zestawienie wykonanych badań POZ](#)

Pobrane wyniki badań zapisywane są automatycznie w danych medycznych pacjenta, które dostępne są m. in. z poziomu *Rejestracji / Kartoteki pacjentów*. Po wybraniu odpowiedniej zakładki "Badania lab." lub "Badania diag." użytkownik otrzyma dostęp do wyników wszystkich zleconych badań, bez możliwości ich edycji.

Kowalski Jan (M), 0000000000, 48 lat

Badania lab. Badania diag. Czynniki ryzyka Konsultacje Skierowania Rehabilitacje Sanatoria Hospitalizacje

Kod lub nazwa badania:

Nr	Kod	Nazwa	Wynik	JM	Min	Max	Norma
1.	BIS012	Cholesterol	187	mg/dL	115	190	N
2.	BIS033	Trójglicerydy	80	mg /dl		150	N
3.	BIS002	ALAT	15	U/L		41	N
4.	BIS019	Glukoza we krwi	101	mg/dl	70	99	H
5.	BIS022	Kreatynina + GFR - wskaźnik czynności nerek - Kreatynina	1	mg/dl	0.7	1.3	N
6.	BIS022	Kreatynina + GFR - wskaźnik czynności	76				N

Data wykonania	Nazwa
2016-08-31	Wynik badania laboratoryjnego
2016-08-31	Wynik badania laboratoryjnego
2015-09-24	Wynik badania laboratoryjnego
2015-09-24	Wynik badania laboratoryjnego
2014-09-25	Krew pełna - morfologia krwi obwodowej z wzorem o...
2014-09-25	Krew pełna - odczyn opadania krwinek czerwonych (...)
2014-09-25	Mocz - ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową ...
2014-09-25	Surowica - glukoza

Załączniki

Ponadto lekarz realizujący kolejną wizytę pacjenta w tej komórce, otrzyma informację o wynikach badań. Po otwarciu wizyty gabinetowej w pierwszej kolejności zostanie wyświetlone okno *Dokumenty medyczne wizyty*, powiadamiając lekarza o nowych, istotnych dla realizowanego świadczenia danych medycznych. Dla zwiększenia czytelności czerwonym kolorem oznaczane są wyniki badań laboratoryjnych, których norma została przekroczona.

Dokumenty medyczne wizyty

Data	Rodzaj
2016-08-31	Wynik badania laboratoryjnego

Nr	Kod	Nazwa	Wynik	JM	Min	Max	Nor
1.	BIS012	Cholesterol	187	mg/dL	115	190	N
2.	BIS033	Trójglicerydy	80	mg /dl		150	N
3.	BIS002	ALAT	15	U/L		41	N
4.	BIS019	Glukoza we krwi	101	mg/dl	70	99	H
5.	BIS022	Kreatynina + GFR - wskaźnik czynności nerek - Kreatynina	1	mg/dl	0.7	1.3	N
6.	BIS022	Kreatynina + GFR - wskaźnik czynności nerek -	76				N

Załączniki

Status

Nie dopisany do żadnej wizyty

Wyjście

Zaimportowane wyniki badań dodawane są również do zestawienia wykonanych badań POZ (ścieżka: [Ewidencja](#) > [Deklaracje](#) > [Zestawienie wykonanych badań POZ](#)). Warunkiem poprawnego działania funkcjonalności jest wystawienie zlecenia na badania refundowane w komórce realizującej świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej lub przypisanie wyniku badania refundowanego do wizyty realizowanej w takiej komórce.

Uwaga! Wynik dla zlecenia dodanego z poziomu [Punktu pobrań](#) zostanie dopisany tylko do danych medycznych pacjenta (nie zostanie zaewidencjonowany w [Zestawieniu wykonanych badań POZ](#)).

W wersji 6.7.0 aplikacji mMedica w oknie danych medycznych dodano zakładkę "Statystyka badań lab.". Po jej wybraniu wyświetli się lista badań laboratoryjnych wraz z informacją o ich wynikach.

Rozpoznania Badania lab. **Statystyka badań lab.** Badania diag. Czynniki ryzyka Konsultacje Skierowania Rehabilitacje Sanatoria

Kod lub nazwa: Data od: Data do:

Data wykonania	Kod	Nazwa	Wynik
2020-01-30	AN	Mocz – Ciężar właściwy	1.025 [g/ml]
2020-01-30	AN	Mocz – Białko	neg [g/l]
2020-01-30	AN	Mocz – Cukier	neg [g/dl]

W celu porównania wyników danego rodzaju badania wykonanego pacjentowi, za pomocą dostępnych opcji filtra można wyszukać pozycje po kodzie, nazwie oraz dacie wykonania.

Rozdział


7

Obsługa dokumentów anulujących wyniki badań

W wersji 8.4.0 aplikacji mMedica została dodana funkcjonalność obsługi dokumentów anulujących wyniki badań w formacie PIK HL7 CDA przesłanych przez zintegrowane laboratorium/pracownię diagnostyczną.

Aktualnie wynik badania, dla którego został zaimportowany dokument anulujący, jest automatycznie usuwany z okna danych medycznych pacjenta. Natomiast jeżeli wynik taki został wcześniej powiązany z wizytą lub hospitalizacją, konieczne jest usunięcie tego powiązania. W tym celu należy w *Gabinecie* po otwarciu wizyty do edycji przejść do okna wyników badań (przycisk **Badania lab.** lub **Badania diag.** na górze ekranu) lub dokumentów medycznych wizyty (przycisk **Dokumenty medyczne** na dole ekranu) i po



zaznaczeniu wyniku skorzystać z przycisku , dostępnego po prawej stronie okna. W przypadku hospitalizacji ewidencjonowanej w module "Hospitalizacje" dokonuje się tego w oknie jej dokumentów medycznych (przycisk **Wyniki badań, konsult., skier.**).

Dla ułatwienia wyszukania wyników, dla których zostały zacytane dokumenty anulujące, pozycje takie są we wspomnianych wyżej oknach oznaczone na liście kolorem fioletowym. Dodatkowo w oknie *Dokumenty medyczne wizyty* wyświetlany jest dla nich status "Dopisany do bieżącej wizyty, usunięty" (zdz. poniżej).

The screenshot shows the 'Dokumenty medyczne wizyty' window. On the left, there is a table with columns 'Data' and 'Rodzaj'. The first row is highlighted in purple and contains the date '16-11-2022' and the text 'Wynik badania laboratoryjnego'. On the right, there is a larger table with columns: 'Nr Kod', 'Nazwa', 'Wynik JM', 'Min', 'Max', 'Norma', and 'Data wykonani'. The table contains three rows of lab results:


Nr Kod	Nazwa	Wynik JM	Min	Max	Norma	Data wykonani
1. L43	Glukoza z krwi żyłnej					24-09-2021 08:12
2. I17	Aminotransferaza alaninowa (ALT)	20 U/l		41		24-09-2021 08:12
3. I19	Aminotransferaza asparaginianowa (AST)	17 U/l		40		24-09-2021 08:12

Below the table, there is a 'Załączniki' section with a large empty text area. At the bottom, there is a 'Status' field containing the text 'Dopisany do bieżącej wizyty, usunięty'. A red box highlights this status text. In the top right corner of the window, there is a red box around a red arrow icon. At the bottom right, there is a 'Wyjście' button with a green arrow icon.

Skorzystanie ze wspomnianego przycisku spowoduje usunięcie wyniku z listy dokumentów medycznych wizyty/hospitalizacji. Na końcu należy dokonać ponownej autoryzacji wizyty.

Użytkownik jest informowany o konieczności wykonania powyższych czynności za pomocą okna powiadomień aplikacji.

Jeżeli został zaimportowany dokument anulujący wynik badania powiązane z wizytą/hospitalizacją, po zalogowaniu do programu personelu, który realizował taką wizytę lub edytował taką hospitalizację, w oknie powiadomień aplikacji wyświetli się dodatkowy rodzaj powiadomienia Wyniki badań do autoryzacji, zaznaczony na poniższym zdjęciu.

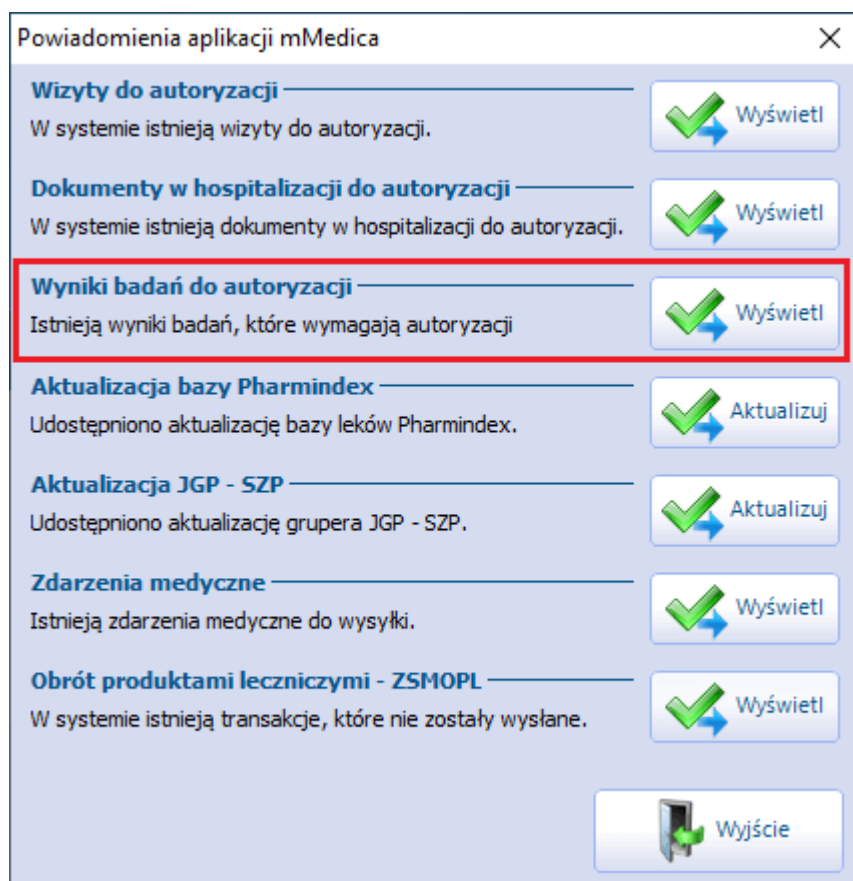

Po wyborze przycisku **Wyświetl** użytkownik zostanie przeniesiony do okna **Wyniki badań do ponownej autoryzacji**, prezentującego listę wizyt/hospitalizacji, od których należy odłączyć anulowany wynik badania. Wybór przycisku **Dane** dla wskazanej pozycji lub kliknięcie w nią dwukrotnie lewym przyciskiem myszy uruchomi okno wizyty/hospitalizacji, w którym użytkownik będzie mógł przeprowadzić wspomnianą operację.

Rozdział

8

Rozliczenie badań prywatnych w Module Komercyjnym

Użytkownicy wykorzystujący do pracy Moduł Komercyjny mogą rozliczyć płat

W wersji 5.10.0 aplikacji mMedica dodano funkcjonalność rozliczania płatności pacjenta za wykonane badania. Dedykowana jest użytkownikom wykorzystującym do pracy Moduł Komercyjny.

Ewidencja płatności za wykonanie nierefundowanych badań możliwa jest z poziomu Kartoteki pacjentów, poprzez wybranie przycisku **Fiskalizacja** i z poziomu **Punktu pobrań** po wybraniu przycisku **Rozlicz**.

Szczegółowy opis funkcjonalności rozliczania badań prywatnych znajduje się w [instrukcji Modułu Komercyjnego](#).